

ENDOSCOPIA

Catálogo de Productos



Tabla de Contenido

Micro-Tech Endoscopy	03
Mar Flow	10
Ovesco	15
Olympus	17
Taewoong	26
MTW Endoskopie Manufaktur	33
Meditalia	38
Black Eye	41

Corporación Médica Monterrey, una destacada empresa comprometida con la excelencia en el ámbito de la salud, se distingue por ser un proveedor oficial de renombradas marcas dentro de la industria. Nuestro enfoque se centra en la comercialización de productos de alta calidad destinados a mejorar y promover el bienestar general. Con un compromiso inquebrantable hacia la satisfacción del cliente, **CMMTY** se ha consolidado como un referente confiable en el mercado.

La dedicación a la innovación y la calidad es el pilar fundamental que impulsa nuestra empresa. Trabajamos de la mano con marcas líderes en el sector, garantizando así la disponibilidad de productos que cumplen con los estándares más exigentes. Además, nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está comprometido con brindar un servicio excepcional, asesorando a nuestros clientes para que encuentren las soluciones más adecuadas a sus necesidades específicas.

Meditalia®

ZKSK 中科盛康



MarFlow®


OLYMPUS



MTW®
Endoskopie Manufaktur



ovesco
innovation in scope

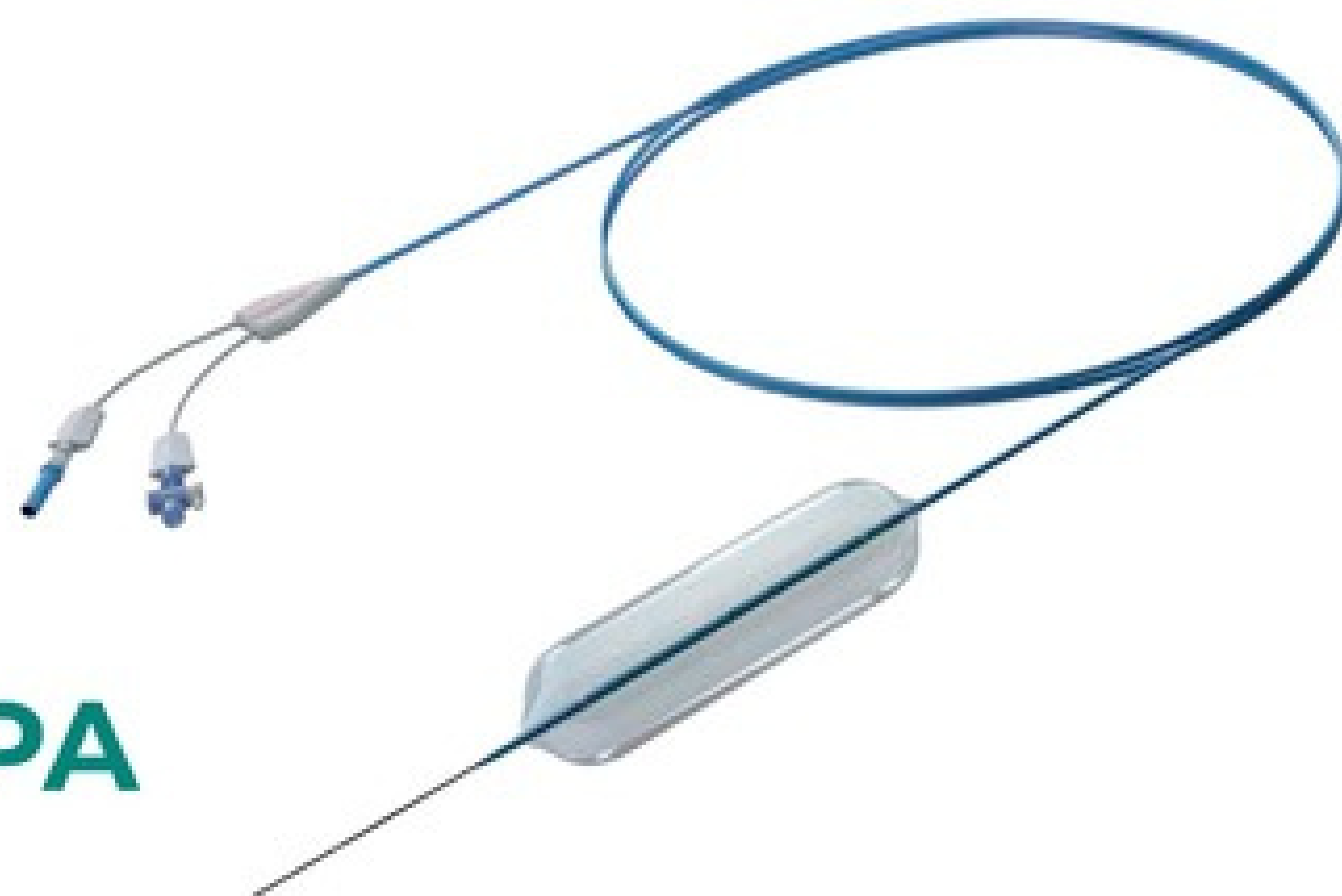

Balones MULTI ETAPA

Los balones multi etapa de Microtech están diseñados para inflarse a 3 diámetros distintos a 3 presiones diferentes durante un procedimiento, además su diseño de alta presión asegura que el balón mantenga su forma a lo largo de la longitud de trabajo, por lo tanto, permitiendo una dilatación óptima.

Bajo diferentes presiones los balones adquieren un diámetro especificado de expansión de una manera precisa.

Un proceso de fabricación excelente, y los mejores materiales, aseguran que los balones de Microtech alcanzan los más altos estándares de calidad.

Balones multi etapa guiados - 230

Código	Diámetro de inflado		Longitud del balón	Presión de Inflado		Canal de Trabajo	Tamaño del Catéter	Factor de Empaque
	(mm)	(Fr)		(atm)	(kPa)			
MBD-AS-BB-2	6-7-8	18-21-24	30	3-6-10	304-608-1013	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-BS-BB-2	8-9-10	24-27-30	30	3-5.5-9	304-557-912	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-CS-BB-2	10-11-12	30-33-36	30	3-5-8	304-507-811	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-DS-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	30	3-4.5-8	304-456-811	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-AM-BB-2	6-7-8	18-21-24	55	3-6-10	304-608-1013	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-BM-BB-2	8-9-10	24-27-30	55	3-5.5-9	304-557-912	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-CM-BB-2	10-11-12	30-33-36	55	3-5-8	304-507-811	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-DM-BB-2	12-13.5-15	36-40.5-45	55	3-4.5-8	304-456-811	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-EM-BB-2	15-16.5-18	45-49.5-54	55	3-4.5-7	304-456-709	≥Φ2.8	230	1/Caja
MBD-FM-BB-2	18-19-20	54-57-60	55	3-4.5-6	304-456-608	≥Φ2.8	230	1/Caja

Dispositivo para INFLADO DE BALONES



BLOQUEADO



DESBLOQUEADO



El dispositivo para inflado de Micro-Tech fue diseñado para acomodar manos más pequeñas; incluye una palanca de bloqueo.

- La palanca de bloqueo se controla con la mano.
- El émbolo se mueve para purgar, inflar o crear un vacío.
- El dial luminoso muestra la presión en atmósferas en la escala exterior para una clara visualización.
- La jeringa de un solo uso de 60mL incluye una marca de llenado para los balones Micro-Tech.

Hidrofílicas ESTÉRILES

Las guías de Microtech complementan a nuestra amplia selección de balones y a nuestro portafolio de CPRE para un posicionamiento exacto y preciso.

Todas las guías son fabricadas de Nitinol resistente a las deformaciones por doblez y torsión. Gracias a sus pintas hidrofílicas, las guías se desplazan fácilmente por zonas tortuosas y por las estenosis complicadas, esto se debe a su alta rigidez y facilidad de control.

Guías Hidrofílicas Estériles


Código	Diámetro máximo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Tipo de punta	Factor de Empaque
MTN-BM-89/26-A	0.035	260	Recto	2/Caja
MTN-BM-89/26-A-J	0.035	260	Angle	2/Caja
MTN-BM-89/45-A	0.035	450	Recto	2/Caja
MTN-BM-89/45-A-J	0.035	450	Angle	2/Caja
MTN-BM-63/26-A	0.025	260	Recto	2/Caja
MTN-BM-63/26-A-J	0.025	260	Angle	2/Caja
MTN-BM-63/45-A	0.025	450	Recto	2/Caja
MTN-BM-63/45-A-J	0.025	450	Angle	2/Caja

Esfinterótomo - Estándar, con Guía Precargada

Código	Lumen	Longitud de la punta (mm)	Longitud de alambre de corte (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Guía recomendada (in)	Alambre de Corte Semiaislado	Factor de Empaque
DSP-30520-111121	3	5	20	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30520-111221	3	5	20	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30525-111121	3	5	25	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30525-111221	3	5	25	200	0.035	W/	2/Caja
DSP-30530-111121	3	5	30	200	0.035	W/O	2/Caja
DSP-30530-111221	3	5	30	200	0.035	W/	2/Caja

Balones de EXTRACCIÓN

La amplia gama de productos MICROTECH incluye globos de 3 lúmenes de alta calidad para la eliminación confiable de cálculos pequeños y lodos del conducto biliar. La punta cónica atraumática del catéter permite un posicionamiento fácil y preciso con los dos marcadores de rayos X.

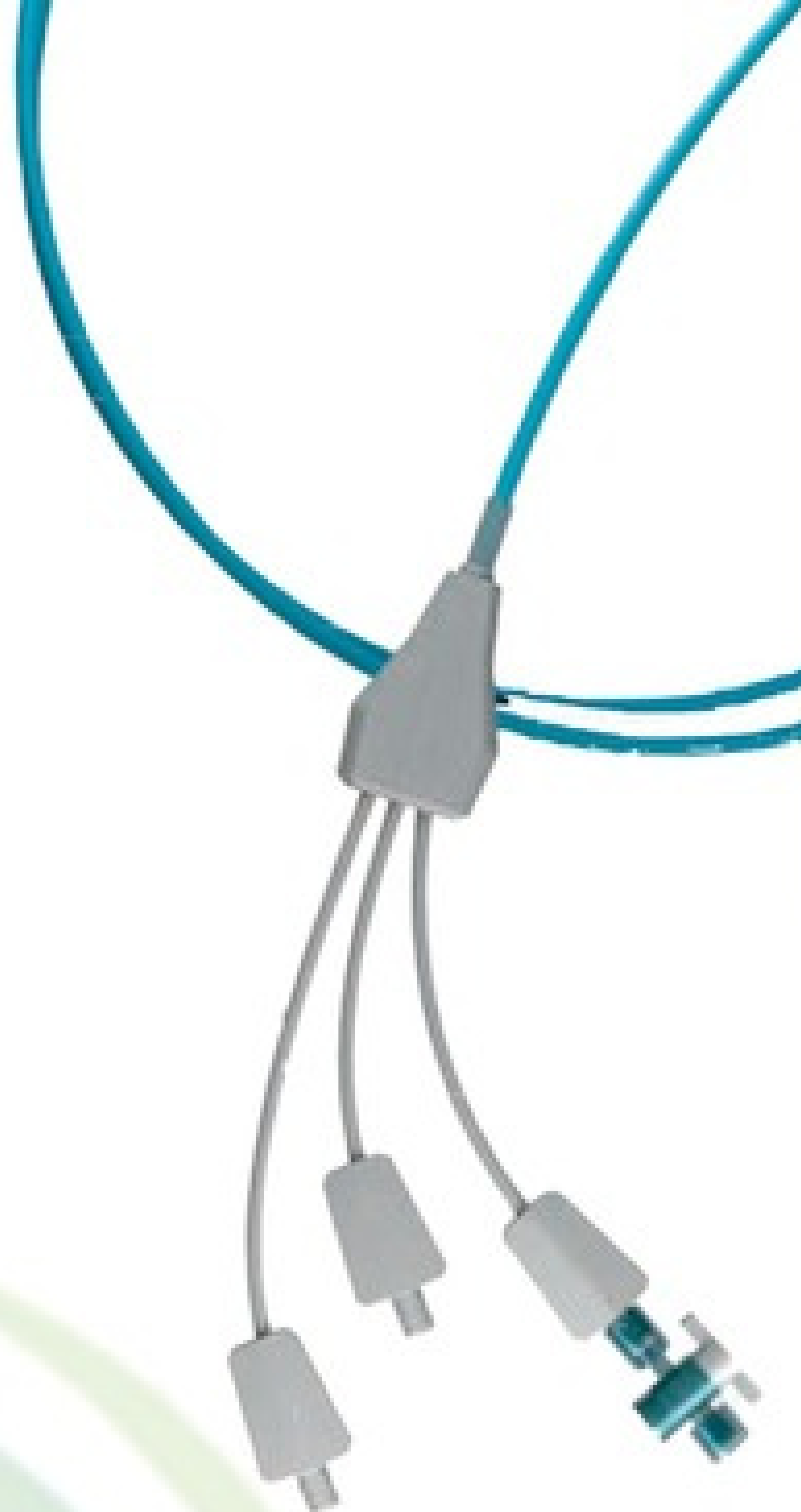

Micro-Tech

Balones de Extracción

Código	Diámetro de Inflado (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Guía Recomendada (in)	Canal de Trabajo (mm)	Orificio de Inyección	Factor de Empaque
SRB-T-9/12/15-20	9-12-15	200	0.035	≥φ2.8	Distal	1/Caja
SRB-T-12/15/18-20	12-15-18	200	0.035	≥φ2.8	Distal	1/Caja
SRB-T-15/18/21-20	15-18-21	200	0.035	≥φ2.8	Distal	1/Caja



SET MULTIBANDA PARA LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS Y RECTALES

La banda de endoscopia ha demostrado ser un tratamiento simple y efectivo. La ligadura de várices se realiza fácilmente de manera ambulatoria con menos dolor y con una recuperación más corta. El set multibanda para ligadura de varices esofágicas Y rectales de MICRO-TECH es una solución rentable para tratamientos ambulatorios.



EXCELENTE VISIBILIDAD

Tubo de ligadura limpio con bandas montadas que optimiza la vista endoscópica mientras mantiene la succión.

DISEÑO DE BANDA

El diseño de banda cuadrada proporciona una forma uniforme y una retención confiable. El set puede venir con seis o siete bandas precargadas sin látex.

SISTEMA PARA UN USO MÁS FÁCIL

El orificio de amarre de la manija permite una carga rápida y fácil del alambre. La banda de alerta notifica al operador cuando queda una sola banda.

Set multibanda para ligadura de varices esofágicas y rectales			
Código	Diámetro de endoscopio	Longitud	Factor de Empaque
MBLS-7F-NL	9.4 ~ 13.0 mm	145 ± 30 mm	7 / Caja
MBLS-6F-NL	9.4 ~ 13.0 mm	145 ± 30 mm	6 / Caja

MANGO DE COLORES PARA UN FÁCIL RECONOCIMIENTO



Para reconocer los diferentes tamaños de SureClip™ de manera rápida y fácilmente, cada tamaño tiene mangos y revestimiento de colores únicos.

Especificaciones

Referencia	Apertura del clip (mm)	Largo (mm)	Ángulo del clip	Clip Ø mm	Color de recubrimiento
SURECLIP™ SMALL ROCC-C-26-235-C	8	2350	135°	2.6	Rosa
SURECLIP™ ROCC-D-26-235-C	11	2350	135°	2.6	Azul
SURECLIP™ PLUS ROCC-F-26-235-C	16	2350	135°	2.6	Amarillo

AGUJA PARA ASPIRACIÓN POR ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

TRIDENT EUS-FNB

PARA ESTRUCTURAS DE TEJIDOS HISTOLÓGICOS

Beneficios

- Diseñada para utilizarse cuando una muestra FNA no presenta diagnóstico o ha sido inadecuada y se requiere una muestra de tejido.
- Aleación de Cromo y Cobalto para brindar flexibilidad, durabilidad y acceso oportuno al objetivo.
- Punta única Trident™ de multipunto para facilitar la toma de tejido, asegurando un buen muestreo.
- Ajustadores de un solo botón, para determinar la profundidad de la aguja y proveer un control simple y preciso con un sola mano.
- Un diseño suave en la vaina, asegura un buen empuje durante angulaciones así como protección para el canal de trabajo.
- Marcajes V-notch para mejorar ecogenicidad durante ultrasonido.



Especificaciones

REF	Aguja	Vaina (mm)	Longitud máxima de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud del trabajo (mm)
EUS- 25 - 1 - N	25	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375-1415
EUS- 22 - 1 - N	22	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375-1415
EUS- 19 - 1 - N	19	1.8	80	Aleación Co-Cr	≥ 2.8	1375-1415

LIGADOR MULTIBANDA BARRIL CON 6 BANDAS.

**Se utiliza para la ligadura endoscópica del esófago.
várices en o por encima de la unión gastroesofágica**

Se adapta a una amplia gama de endoscopios
Color de luz de la penúltima banda
Barril con 7 bandas disponibles.

Ligador de banda estándar

Requiere de 9,5 a 11,2 mm
Diámetro del endoscopio

Ligador de banda pediátrico

Requiere de 8,0 a 9,5 mm
Diámetro del endoscopio

	Art. No.	Description
Standard	SGK-6	Set incl. Applicator barrel and thread puller
	SGB-6	Barrel and thread puller only
Paediatric	SGK-6-S	Set incl. Applicator barrel and thread puller
	SGB-6-S	Barrel and thread puller only



SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL

Con el tubo que conduce al yeyuno

Art. No.	Size (Fr/CH)	Working Length (cm)
NJFT-12120	12	120
NJFT-12	12	155
NJFT-14120	12	120
NJFT-14	12	155
NJFT-16120	12	120
NJFT-16	12	155



PEG KIT

Se utiliza para la colocación de gastrostomía endoscópica percutánea y para proporcionar nutrición enteral al paciente que lo requiera soporte nutricional

Art. No.	Size (Fr/CH)	Remarks
PEG-20	20	
PEG-20+SN+SC	20	With Snare and Scissors
PEG-24	24	
PEG-24+SN+SC	24	With Snare and Scissors

El **KIT PEG** contiene:

- 1 Tubo de alimentación de silicona
- 1 Cable de inserción de bucle
- 1 Brida para cables
- 1 Adaptador universal
- 1 Adaptador de bolo
- 1 Casquillo de silicona para bloqueo
- 1 Aguja introductora – Aguja grande
- 1 Bisturí
- 1 Jeringa de 5 ml con aguja
- 1 Aguja calibre 25 – Aguja pequeña
- 1 Cortina



CATÉTER DE INTERCAMBIO PEG

**100% Silicone Balloon Catheter
Balloon 20ml**

Art. No.	Size (Fr/CH)	Usable Length (cm)
REPL-CAT 18	18	19
REPL-CAT 20	20	19
REPL-CAT 22	22	19
REPL-CAT 24	24	19



BALÓN GÁSTRICO ESOFÁGICO DISPOSITIVO DE DEFLACIÓN

**Para desinflar el tubo esofágico previamente colocado
balón gástrico**


Art. No.	Sheath Ø (mm)	Working Channel Ø (mm)	Working Length (cm)
SEGBDD	2.5	2.8	170



BALÓN GÁSTRICO ESOFÁGICO RECUPERACIÓN

Para recuperar el balón gástrico esofágico desinflado

Art. No.	Sheath Ø (mm)	Working Channel Ø (mm)	Working Length (cm)
SEGBRD	2.5	2.8	170

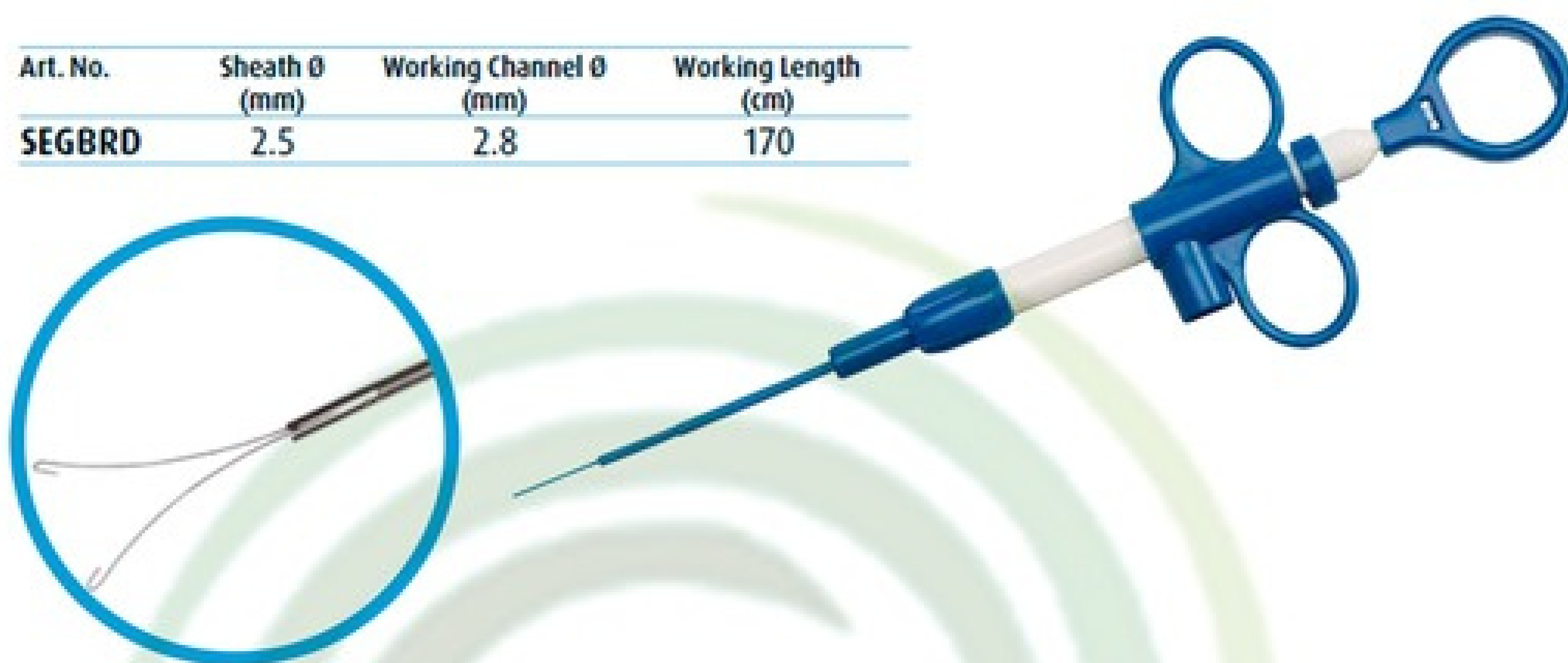

STENTS BILIARES

Utilizado para el drenaje de conductos biliares obstruidos.
Material PEBAX

Art. No.	Size (Fr/CH)	Length (cm)
BSS 10/5	10	5
BSS 10/7	10	7
BSS 10/8	10	8
BSS 10/9	10	9
BSS 10/10	10	10
BSS 10/12	10	12
BSS 10/15	10	15






SISTEMA INTRODUTOR DE STENT BILIAR

Se utiliza para la colocación endoscópica de un stent biliar.

Marcador radiopaco sobre catéter guía.

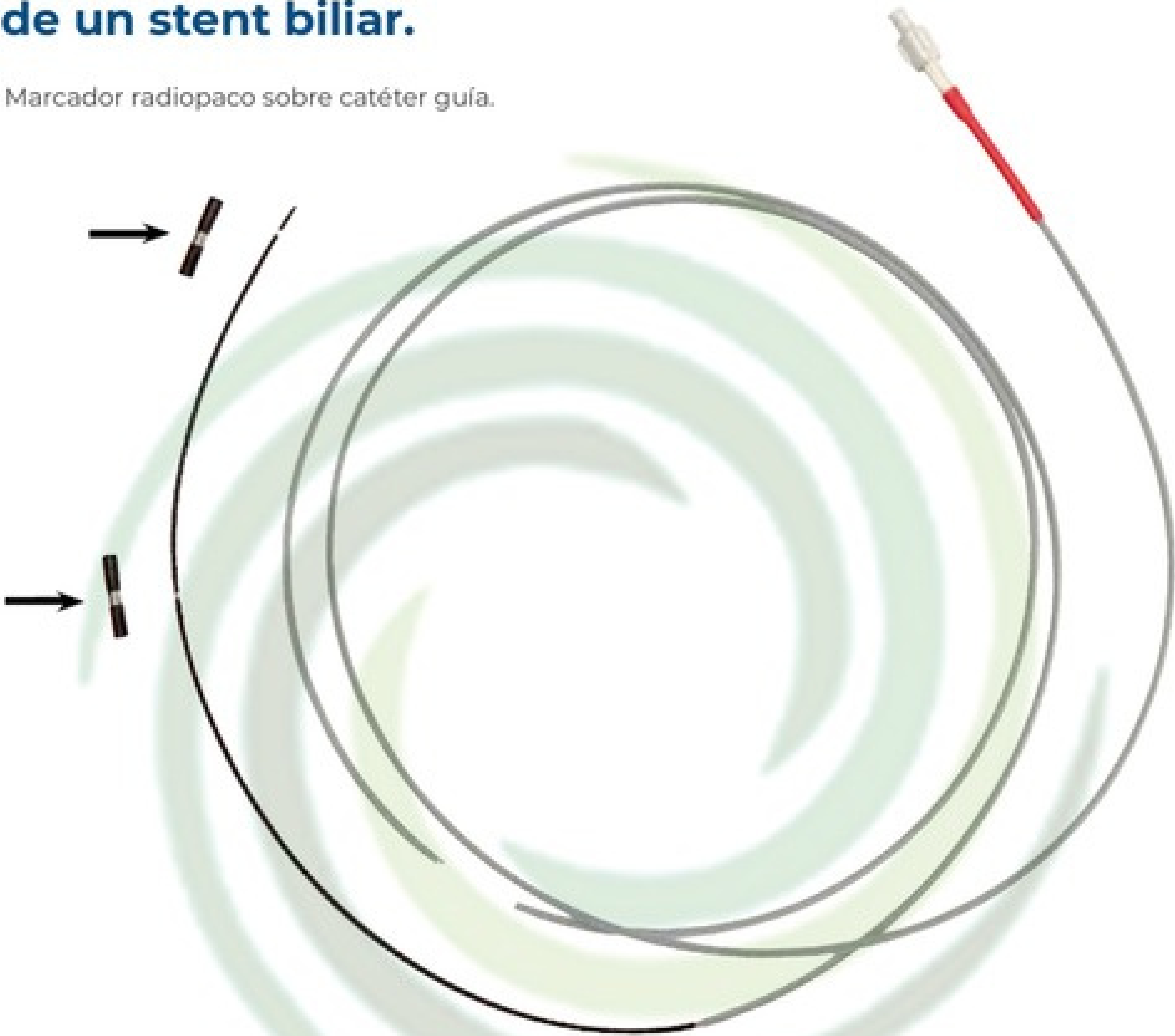

Art. No.	Productname	Size (Fr/CH)	Required Guidewire	Length (cm)
SSIS-10	Biliary Stent Introducer System	10	0.038"	220

OTSC®
CLIP



OTSC®
ANCHOR




OTSC®
TWIN GRASPER®



Scope Compatibility		Order No.	Description	Length	Tooth shape	Depth
Gastrosopes*	8.5 - 9.8mm	100.01	10/3a	165 cm	blunt	3 mm
		100.02	10/3t	165 cm	spiked	3 mm
	8.5 - 11mm	100.03	11/3a	165 cm	blunt	3 mm
		100.04	11/3t	165 cm	spiked	3 mm
		100.09	11/6a	165 cm	blunt	6 mm
		100.10	11/6t	165 cm	spiked	6 mm
Therapeutic gastrosopes* Pediatric colonoscopes*	10.5 - 12mm	100.05	12/3a	165 cm	blunt	3 mm
		100.06	12/3t	165 cm	spiked	3 mm
		100.11	12/6a	165 cm	blunt	6 mm
		100.12	12/6t	165 cm	spiked	6 mm
		100.27	12/6gc	165 cm	spikes-gastric closure	6 mm
		100.29	12/3t	220 cm	spiked	3 mm
		100.30	12/6a	220 cm	blunt	6 mm
		100.31	12/6t	220 cm	spiked	6 mm
2T gastrosopes* Adult colonoscopes*	11.5 - 14mm	100.07	14/3a	220 cm	blunt	3 mm
		100.08	14/3t	220 cm	spiked	3 mm
		100.13	14/6a	220 cm	blunt	6 mm
		100.14	14/6t	220 cm	spiked	6 mm

Application aid

Hay dos instrumentos disponibles para permitir una aplicación más efectiva. Estos se pueden insertar al lado del hilo en el mismo canal de trabajo.

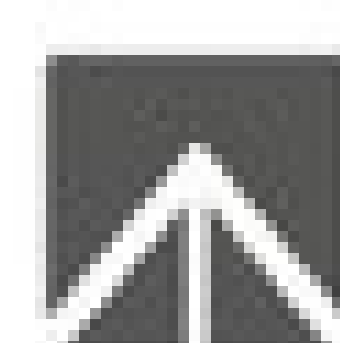


OTSCO
PINZA GEMELA®



Para una aproximación más fácil de los bordes abiertos de una lesión (por ejemplo, perforación).

	OTSC® Twin Grasper®	
ref. no.	200.44	200.45
working length	1650 mm	2200 mm
max. Ø	2.6 mm	2.6 mm

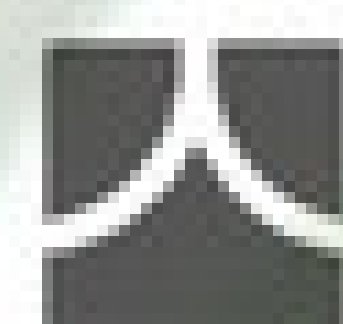

OTSC®
ANCLA



Para una mejor aproximación del tejido especialmente cuando son duras o fibróticas (por ejemplo, fistulas, crónicas úlcera), ancla 220tt de OTSC® especialmente para fino tejido.

	OTSC® Anchor	OTSC® Anchor 220tt
ref. no.	200.10	200.11
working length	1650 mm	2200 mm
max. Ø	2.4 mm	2.4 mm
needle width	12 mm	9 mm
stitch depth	4 mm	2–2.5 mm

ASPIRACIÓN GUIADA POR ULTRASONIDO

Agujas de aspiración para FNA guiada por EUS, de un solo uso

EZShot 3 Plus



- * La aguja de Nitinol conserva la forma para garantizar una trayectoria predecible y constante
- * La cubierta de bobina metálica de múltiples capas brinda flexibilidad y asegura una entrada suave de la aguja a la lesión
- * El diseño de la punta Menghini permite la perforación de la lesión desde ángulos oblicuos
- * La versión de orificio lateral disponible en tamaños de 19 G y 22 G
- * Longitud de cubierta ajustable
- * Incluye llave de paso y jeringa de 20 ml




Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Longitud Máxima de la Aguja (mm)	Ancho de la Aguja (G)	Forma de la Punta del Estilete	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
NA-U200H-8019	5	2.8	140	80	19 G	Redondeada	EUS	
NA-U200H-8019S	5	2.8	140	80	19 G con orificio lateral	Redondeada	EUS	
NA-U200H-8022	5	2.8	140	80	22	Redondeada	EUS	
NA-U200H-8022S	5	2.8	140	80	22 G con orificio lateral	Redondeada	EUS	
NA-U200H-8025	5	2.8	140	80	25	Redondeada	EUS	


CPRE

Alambre guía, de un solo uso

VisiGlide 2

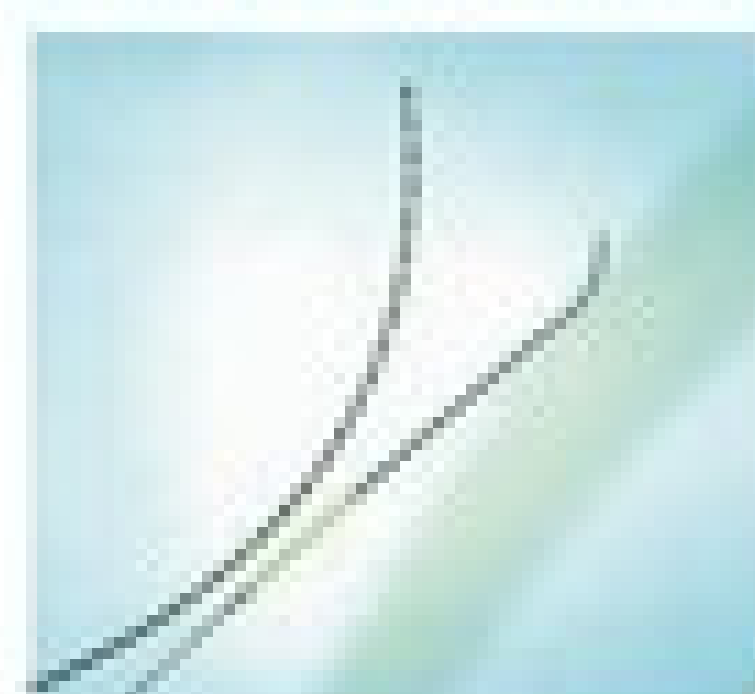

- * Flexibilidad de punta mejorada para una navegabilidad excelente en anatomía ductal estrecha
- * Cono de hilo de núcleo más pronunciado en la punta distal para contacto con tejidos blandos
- * Diseño de ángulo reconfigurado junto con un control de par un-a-uno para
- * Control preciso
- * Mantiene las principales características de la línea de guías VisiGlide

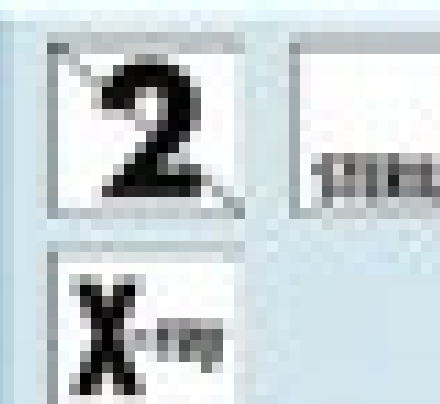

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Longitud de Trabajo (cm)	Característica	Diámetro del Alambre Guía (in)	Longitud del Recubrimiento Hidrofílico (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
G-260-2527S	1	270	Punta recta	0.025	70	☑	
G-260-2527A	1	270	Punta angulada	0.025	70	☑	
G-260-3527S	1	270	Punta recta	0.035	70	☑	
G-260-3527A	1	270	Punta angulada	0.035	70	☑	

Esfinterotomo de triple lumen, V-System, de un solo uso

CleverCut3V




- * Lúmenes separados para el alambre de guía, el alambre de corte, y la inyección del tinte del contraste
- * Único revestimiento de seguridad
- * Orientación estable del alambre de corte
- * Excelente visibilidad bajo fluoroscopia
- * La manija de fricción mantiene el lazo
- * Diseño pre-curvado
- * Gancho en C integrado, vaina en V y marcado en V



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Diámetro del Alambre Guía (in)	Alambre de Corte (B) (mm)	Diámetro de la Punta Distal (Fr)	Longitud de la Punta Distal (A) (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
KD-V411M-0320	1	2.8	170	0.035	20	4.5	3	☑	
KD-V411M-0330	1	2.8	170	0.035	30	4.5	3	☑	
KD-V411M-0720	1	2.8	170	0.035	20	4.5	7	☑	
KD-V411M-0725	1	2.8	170	0.035	25	4.5	7	☑	
KD-V411M-0730	1	2.8	170	0.035	30	4.5	7	☑	
KD-V411M-1520	1	2.8	170	0.035	20	4.5	15	☑	
KD-V411M-1530	1	2.8	170	0.035	30	4.5	15	☑	
KD-V431M-0720	1	2.8	170	0.025	20	4	7	☑	
KD-V431M-0730	1	2.8	170	0.025	30	4	7	☑	

CPRE

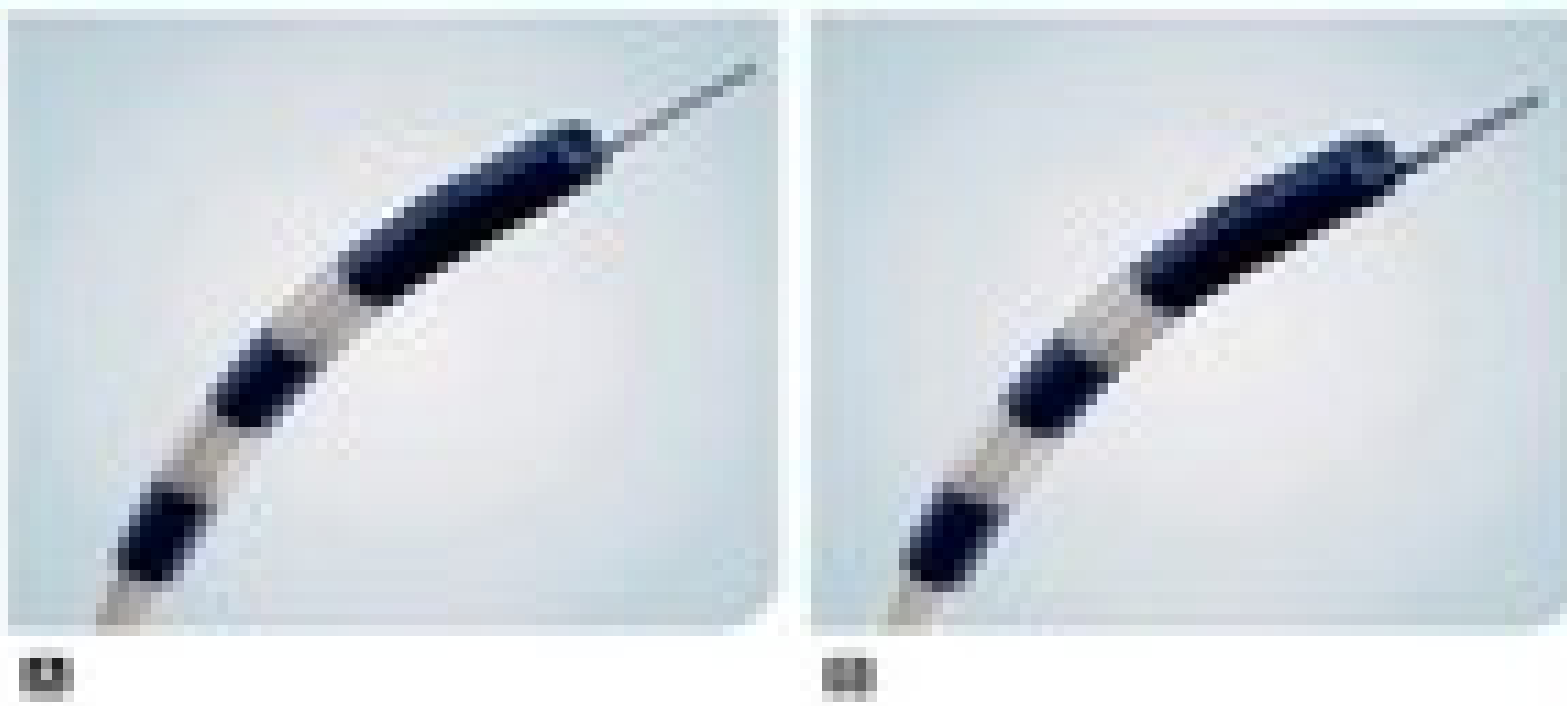


- Revestimiento de seguridad único (sólo con KD-V451M)
- Lúmenes separados para alambre de guía, alambre de corte e inyección de medio de contraste
- Excelente visibilidad bajo fluoroscopia
- Punta pre-curvada y cónica
- Gancho en C integrado, vaina en V y marcado en V



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Longitud Recubierta de la Aguja (mm)	Alambre Guía Compatible (in)	Ancho de la Punta Distal (Fr)	Diámetro de la Aguja (mm)	Longitud de la Aguja (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
KD-V441M	1	2.8	170	-	0.035	5	0.2	5		
KD-V451M	1	2.8	170	3	0.035	5	0.2	5		

Balón para extracción de litos, de triple lumen, V-System, de un solo uso

Multi-3V Plus

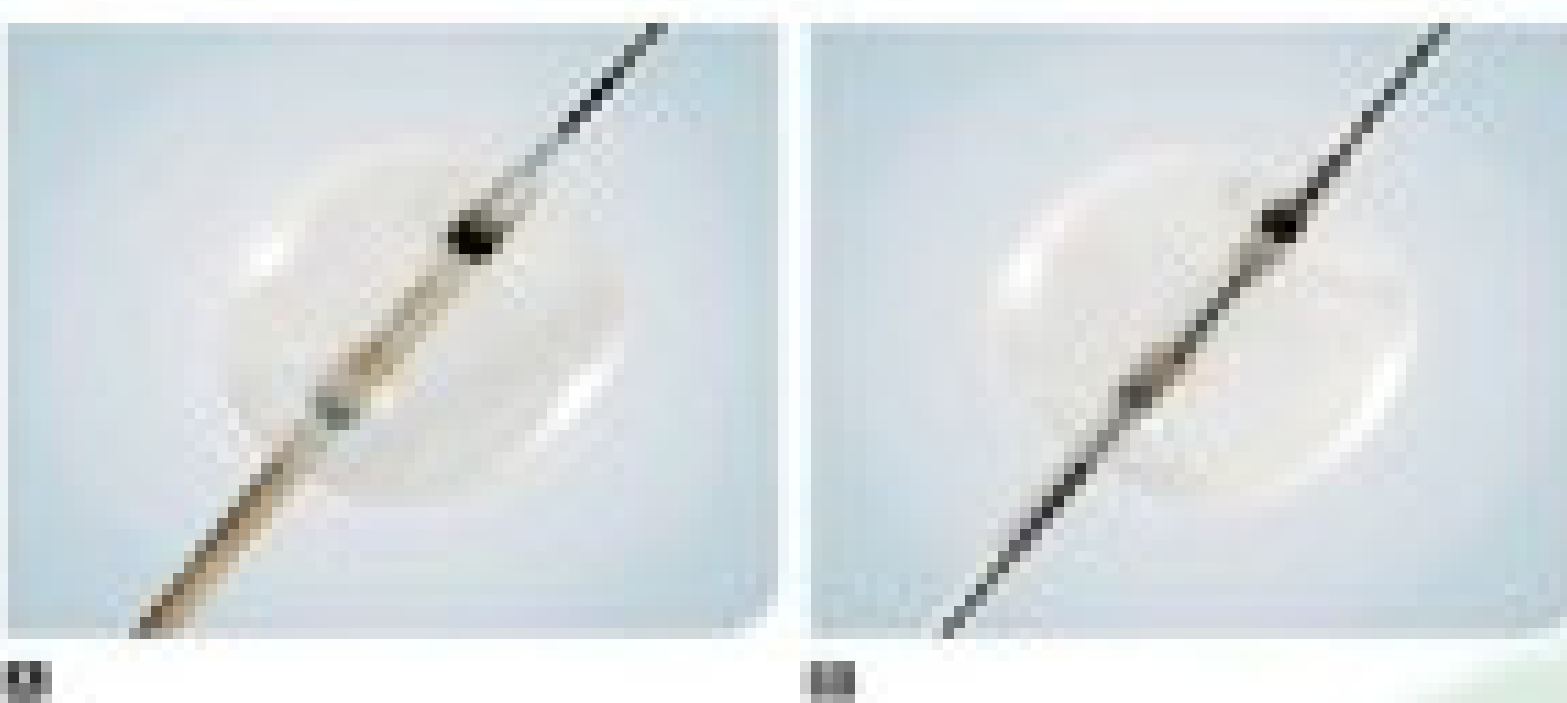


- Elección del diseño, guiado distalmente o sobre el alambre
- Tamaño de globo múltiple
- Tamaño adicional del balón con 20 mm máximo de diámetro de inflación de los conductos dilatados
- Excelente durabilidad del balón
- Gancho en C integrado, Camisa en V (para el tipo sobre el alambre) y V-Marking



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Tamaños de Balón (mm)	Colocación de la Inyección	Diseño de la Camisa	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
B-V233P-A	1	2.8	190	8.5/11.5/15	Arriba	Sobre el alambre		
B-V243Q-B	1	3.2	195	8.5/11.5/15	Abajo	Distalmente guiado por alambre		
B-V433P-A	1	3.2	190	15/18/20	Arriba	Sobre el alambre		
B-V443Q-A	1	3.2	195	15/18/20	Arriba	Distalmente guiado por alambre		\$ -
B-V443Q-B	1	3.2	195	15/18/20	Abajo	Distalmente guiado por alambre		\$ -

ACCESORIOS GI

Válvula de biopsia, de un solo uso

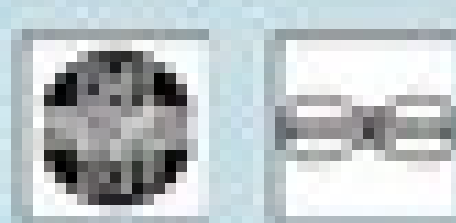

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Descripción	Compatibilidad con Endoscopios	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
MB-358	10	Válvula para biopsia, semidesechable	Consulte las instrucciones de uso del endoscopio	EUS/ENT/SIF	
MAJ-579	1	Válvula de biopsia	Choleodocoscopia: CHF-BP30		


Cepillos combinados - Cepillos de limpieza, de un solo uso

		* Cepillo combinado (cepillo de limpieza de canales y de canales abiertos en una vaina) * Cerdas más duras y gruesas para una mayor eficiencia de limpieza * Gran resistencia a la torsión y capacidad de empuje gracias a la nueva vaina flexible * Punta de plástico en el extremo distal del alambre del cepillo para proteger el canal del endoscopio			2
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Diámetro de Canal de Trabajo (mm)	Compatibilidad con Endoscopios	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BW-411B	50	1.2 - 6.0	Parte del cepillo para limpieza de canales: Para broncoscopios, coledocoscopios, nasofaringoscopios, cistoscopios, rinolaringoscopios e histeroscopios Olympus Parte del cepillo para canales abiertos: Para todos los endoscopios Olympus con un diámetro del canal de trabajo entre 1.2 y 6.0 mm	ENT/SURG/URO	
BW-412T	50	1.2 - 6.0	Parte del cepillo para limpieza de canales: Para todos los endoscopios gastrointestinales de Olympus con una longitud de trabajo del canal de trabajo de 1,800 mm o menos Parte del cepillo para canales abiertos: Para todos los endoscopios Olympus con un diámetro del canal de trabajo entre 1.2 y 6.0 mm	Endoscopia	


Cepillos de limpieza con alma espiral de alambre con punta esférica metálica, de un solo uso

		* Compatible con canales de trabajo entre 1.0 y 1.5 mm * Cepillo de extremo único (cepillo delgado)			2
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Diámetro de Canal del Instrumento (mm)	Compatibilidad con Endoscopios	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BW-400B	10	1.0 - 1.5	Para BF, CHF, ENF, CYF, LF, videoendoscopio HYF	SURG	
BW-400L	10	1.0 - 1.5	Para el canal de aspiración con balón de endoscopio ultrasónico, para el canal de aire del videoendoscopio EVIS / fibroscopio OES serie 40, excepto para la	EUS	
BW-400V	10	1.0 - 1.5	Para el canal de trabajo de CHF-B260, -BP30, para el canal de aire del videoendoscopio EVIS / fibroscopio OES 40	SURG	



Cepillos de limpieza - alma de alambre con punta metálica, reutilizables

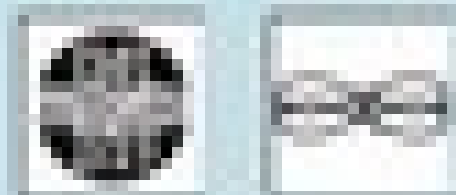		* Compatible con el canal de trabajo del endoscopio Olympus			
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Diámetro de Canal del Instrumento (mm)	Compatibilidad con Endoscopios	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BW-7B	1	1.0 - 1.5	Consulte las instrucciones de uso de los endoscopios	SURG	
BW-7L	1	1.0 - 1.5	Consulte las instrucciones de uso de los endoscopios	EUS	
BW-7V	1	1.0 - 1.5	Consulte las instrucciones de uso de los endoscopios	SURG	



Alambre de limpieza, reutilizable

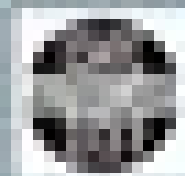		* Compatible con el canal de trabajo del endoscopio Olympus		 	
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Compatibilidad con Endoscopios		Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BW-16C	10	Consulte las instrucciones de uso de los endoscopios		  EUS	



Cepillo de limpieza para apertura de canal, reutilizable

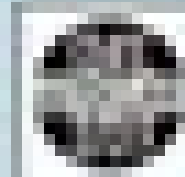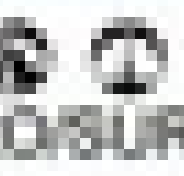		* Compatible con los canales de endoscopios Olympus * Cepillo de apertura de canal para limpiar las válvulas de aire / agua, succión y biopsia		 	
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Diámetro de Canal del Instrumento (mm)	Compatibilidad con Endoscopios	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
MH-507	1	Todos los diámetros	Consulte las instrucciones de uso de los endoscopios	    EUS/URO/SURG/ ENT	

Boquilla protectora, reutilizable

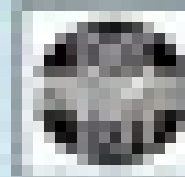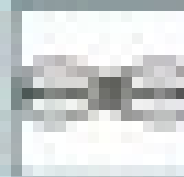					 	
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Descripción		Compatibilidad con Endoscopios		Precio de Lista
A MB-142	1	Boquilla para adulto, reutilizable		Para todos los endoscopios GI con diámetro exterior de tubo de inserción menor a 15 mm		
B MA-392	1	Boquilla grande, reutilizable		Para todos los endoscopios GI con diámetro exterior de tubo de inserción menor a 16 mm		
C MA-474	1	Boquilla chica, reutilizable		Para todos los endoscopios GI con diámetro exterior de tubo de inserción menor a 10 mm		
D MA-651	1	Boquilla para bronco, reutilizable		Para todos los endoscopios GI con diámetro exterior de tubo de inserción menor a 7 mm		

Trampa para pólipos de una sola cámara, un solo uso

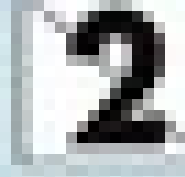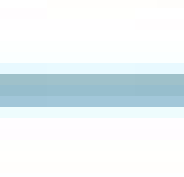		* Visualización mejorada: Tapa transparente y pieza de aumento permiten la visualización y verificación de los pólipos atrapados * Posición conveniente: Tubería reforzada permite que la trampa se coloque en posición vertical para la supervisión directa de la recolección de muestras * Instalación sencilla: El diseño en línea permite la instalación en un solo paso y la reinstalación		  2	
Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Descripción		Área de Compatibilidad	Precio de Lista
H332	50	Trampa para pólipos de una cámara, un solo uso		 	

Catchem™ Trampa para pólipos de 4 cámaras, un solo uso



- * Eficacia del procedimiento: 4 cámaras etiquetadas para muestras múltiples por procedimiento.
- * Opciones ampliadas: Disponible en diseño de cámara fija (ET2213) y diseño de cámara extraíble (ET2211) para satisfacer las preferencias de los médicos. Las cámaras extraíbles se pueden colocar directamente en los contenedores de muestras, eliminando la necesidad de transferirlas.

2

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Descripción	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
ET2213-P	12	Catchem™ Trampa para pólipos de 4 cámaras, un solo uso	☺ ☹	

HEMOSTASIA

Pinzas hemostáticas, giratorias, electroquirúrgicas, de un solo uso

Coagrasper



- * Línea completa diseñada para abordar las diferencias anatómicas del tracto GI
- * Hemostasia rápida y confiable
- * Construcción antideslizante para agarrar con seguridad los puntos de sangrado
- * Proceso de coagulación simplificado durante el agarre
- * Función giratoria

2

STERILE

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal mínimo de trabajo (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Ancho de apertura (mm)	Características	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
A FD-410LR	1	2.8	165	5.0	Rotable, solamente para gastroscopios, uso en esófago ☺	☺	
B FD-411UR	1	3.2	230	4.0	Rotable, solamente para colonoscopios de longitud L ☹	☹	
C FD-412LR	1	2.8	165	6.5	Rotable, solamente para gastroscopios, uso en estóma ☺	☺	

Agujas de inyección, de un solo uso

InjectorForceMax



- * Vaina especialmente rígida para mejorar la penetración y evitar el aplastamiento
- * Amplia gama para una gran variedad de aplicaciones
- * Mango ergonómico con acción de "clic"
- * Diferentes bisel de la aguja (tracto gastrointestinal superior: regular, tracto gastrointestinal inferior: corto) lo que garantiza resultados óptimos en ambas aplicaciones

2

STERILE



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Tamaño Mínimo de Canal (mm)	Longitud de Trabajo (mm)	Bisel de la Aguja	Diámetro de la Aguja (B) (mm)	Longitud de la Aguja (A) (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
NM-401L-0423	5	2.0	165	Regular	23 G = 0.6	4.0	☺	
NM-401L-0523	5	2.0	165	Regular	23 G = 0.6	5.0	☺	
NM-401L-0623	5	2.0	165	Regular	23 G = 0.6	6.0	☺	
NM-401L-0425	5	2.0	165	Regular	25 G = 0.5	4.0	☺	
NM-401L-0525	5	2.0	165	Regular	25 G = 0.5	5.0	☺	
NM-401L-0625	5	2.0	165	Regular	25 G = 0.5	6.0	☺	
NM-400L-0421	5	2.8	165	Regular	21 G = 0.8	4.0	☺	
NM-400L-0521	5	2.8	165	Regular	21 G = 0.8	6.0	☺	
NM-400L-0423	5	2.8	165	Regular	23 G = 0.6	4.0	☺	
NM-400L-0523	5	2.8	165	Regular	23 G = 0.6	5.0	☺	
NM-400L-0623	5	2.8	165	Regular	23 G = 0.6	6.0	☺	
NM-400L-0425	5	2.8	165	Regular	25 G = 0.5	4.0	☺	
NM-400L-0525	5	2.8	165	Regular	25 G = 0.5	5.0	☺	
NM-400L-0625	5	2.8	165	Regular	25 G = 0.5	6.0	☺	
NM-400U-0323	5	2.8	230	Corto	23 G = 0.6	3.0	☺ ☹	
NM-400U-0423	5	2.8	230	Corto	23 G = 0.6	4.0	☺ ☹	
NM-400U-0523	5	2.8	230	Corto	23 G = 0.6	5.0	☺ ☹	
NM-400U-0623	5	2.8	230	Corto	23 G = 0.6	6.0	☺ ☹	
NM-400U-0425	5	2.8	230	Corto	25 G = 0.5	4.0	☺ ☹	
NM-400U-0525	5	2.8	230	Corto	25 G = 0.5	5.0	☺ ☹	
NM-400U-0625	5	2.8	230	Corto	25 G = 0.5	6.0	☺ ☹	
NM-400Y-0423	5	2.8	270	Corto	23 G = 0.6	4.0	☺ Enteroscopia	

TOMA DE BIOPSIA

Pinzas de biopsia, fenestradas, con mandíbulas ovaladas, de un solo uso

EndoJaw



- * Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción
- * Copa fenestradas para biopsias de mayor tamaño
- * Exclusivo mecanismo oscilante de las mandíbulas para facilitar las biopsias tangenciales
- * Vainas con códigos de color para un reconocimiento sencillo de la compatibilidad de área



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-231D.A	20	2.0	115		5.0	①	
FB-231K.A	20	2.0	155		5.0	①	
FB-230K.A	20	2.8	155		7.2	①	
FB-230U.A	20	2.8	230		7.2	② Enteroscopia	

Pinza de biopsia, fenestrada, con aguja, con mandíbulas ovaladas, de un solo uso

EndoJaw



- * Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción
- * Copa fenestradas para biopsias de mayor tamaño
- * Exclusivo mecanismo oscilante de las mandíbulas para facilitar las biopsias tangenciales
- * Aguja para un anclaje mejorado
- * Vainas con códigos de color para un reconocimiento sencillo de la compatibilidad de área



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-241D.A	20	2.0	155		5.0	① ②	
FB-241K.A	20	2.0	155		5.0	①	
FB-240K.A	20	2.8	155		7.2	①	
FB-240U.A	20	2.8	230		7.2	② Enteroscopia	

Pinza de biopsia, fenestrada, con mandíbulas de cocodrilo, de un solo uso

EndoJaw



- * Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción
- * Copas fenestradas para biopsias de mayor tamaño
- * Exclusivo mecanismo oscilante de las mandíbulas para facilitar las biopsias tangenciales
- * Copas tipo cocodrilo para prevenir el deslizamiento
- * Vainas con códigos de color para un reconocimiento sencillo de la compatibilidad de área



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-211K.A	20	2.0	155		5.0	①	
FB-210K.A	20	2.8	155		7.2	①	
FB-210U.A	20	2.8	230		7.2	② Enteroscopia	

Pinza de biopsia, fenestrada, con aguja, con mandíbulas de cocodrilo, de un solo uso

EndoJaw



- * Vaina con revestimiento y reborde para facilitar la inserción
- * Copas fenestradas para biopsias de mayor tamaño
- * Exclusivo mecanismo oscilante de las mandíbulas para facilitar las biopsias tangenciales
- * Mandíbulas tipo cocodrilo para prevenir el deslizamiento
- * Aguja para un anclaje mejorado
- * Vainas con códigos de color para un reconocimiento sencillo de la compatibilidad de área



Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-221K.A	20	2.0	155		5.0	①	
FB-220K.A	20	2.8	155		7.2	①	
FB-220U.A	20	2.8	230		7.2	② Enteroscopia	

Especificaciones de los dispositivos de ESD

Guía de referencia rápida

ADVERTENCIA: Esta guía es solo un resumen de las instrucciones de uso de los dispositivos incluidos. Asegúrese de consultar el manual de instrucciones incluido con la compra de su producto.

 ITknife2™	Especificaciones	KD-611L
	Diámetro máximo de la porción de inserción	2.6 mm
	Longitud del cuchillo de corte	4.0 mm
	Diámetro del cuchillo de corte	0.4 mm
	Longitud del electrodo	0.7 mm
	Diámetro de la punta	2.2 mm
 ITknife nano™	Especificaciones	KD-612U
	Diámetro máximo de la porción de inserción	2.6 mm
	Longitud de trabajo	230 cm
	Longitud del cuchillo de corte	3.5 mm
	Diámetro del cuchillo de corte	0.4 mm
	Longitud del electrodo	0.9 mm
 HookKnife™	Especificaciones	KD-620LR
	Diámetro del canal	2.8 mm
	Longitud de trabajo	165 cm
	Longitud del cuchillo de corte	4.5 mm
	Diámetro del cuchillo de corte	0.4 mm
	Longitud del gancho	1.3 mm
 TTKnife™	Especificaciones	KD-640L
	Diámetro máximo de la porción de inserción	2.6 mm
	Longitud de trabajo	165 cm
	Longitud del cuchillo de corte	4.5 mm
	Diámetro del cuchillo de corte	0.4 mm
	Longitud de la punta del triángulo	0.7 mm
	Espesor de la punta del triángulo	0.4 mm

CUERPO EXTRAÑO

Canastilla de recuperación, rotable, de 6 alambres, de un solo uso



- * Para la recuperación de cuerpos extraños y tejido estirpado
- * Diseño de seis alambres para agarre firme
- * Función de rotación que facilita la captura de objetos
- * Conveniente diseño de un solo uso

2 

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Diámetro de la Canastilla (mm)	Característica	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FG-660YR	1	2.8	270	16	Tipo rotable	 Endoscopia	

SISTEMA RESPIRATORIO

Pinzas de biopsia, fenestradas, con mandíbulas ovaladas, de un solo uso EndoJaw



- * Mecanismo de mandíbula oscilante único para ayudar a las biopsias tangenciales
- * Funda acanalada para facilitar la inserción
- * Copas fenestradas para biopsias más grandes
- * Funda codificada por colores para un fácil reconocimiento de la compatibilidad del área
- * Copas diseñadas para un rendimiento de corte con menos artefactos y menos sangrado

2

STERILE

X-ray

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-231D.A	20	2.0	115		5.0	ENT	



- * Mecanismo de mandíbula oscilante único para facilitar las biopsias tangenciales
- * Vaina acanalada para facilitar la inserción
- * Copas fenestradas para biopsias más grandes
- * Aguja para mejor anclaje
- * Funda codificada por colores para un fácil reconocimiento de la compatibilidad del área
- * Copas diseñadas para un rendimiento de corte con menos artefactos y menos sangrado

2

STERILE

X-ray

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Código de Color de Camisa	Apertura de la Copa (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
FB-241D.A	20	2.0	115		5.0	ENT	

Cepillo de citología, de un solo uso




- * Alto rendimiento citológico
- * Punta metálica para una visibilidad bajo fluoroscopia
- * Cerdas extrafinas de nylon y dureza óptima del cepillo

2

STERILE

X-ray

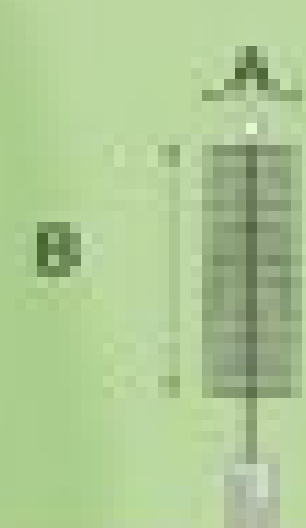

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Ancho del Cepillo (A) (mm)	Longitud del Cepillo (B) (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BC-202D-1210	10	2.0	115	1.2	10		
BC-202D-3010	10	2.0	115	3.0	10		
BC-202D-5010	10	2.0	115	5.0	10		

Cepillo de citología, de un solo uso






- * Tipos de fundas cubiertas y descubiertas disponibles
- * Punta de metal para visibilidad bajo fluoroscopia
- * Para broncoscopios de canal ultra delgado de 1.2 mm.

2

STERILE


X-ray

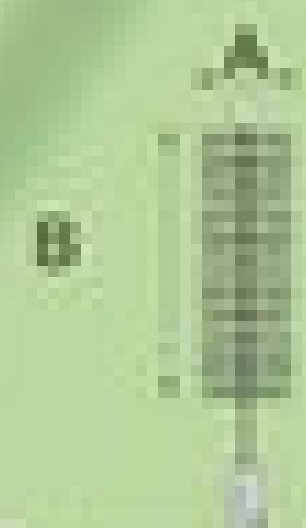

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Ancho del Cepillo (A) (mm)	Longitud del Cepillo (B) (mm)	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
BC-201C-1006	6	1.2	105	1.0	6.0		

Agujas de aspiración EBUS-TBNA, de un solo uso

ViziShot

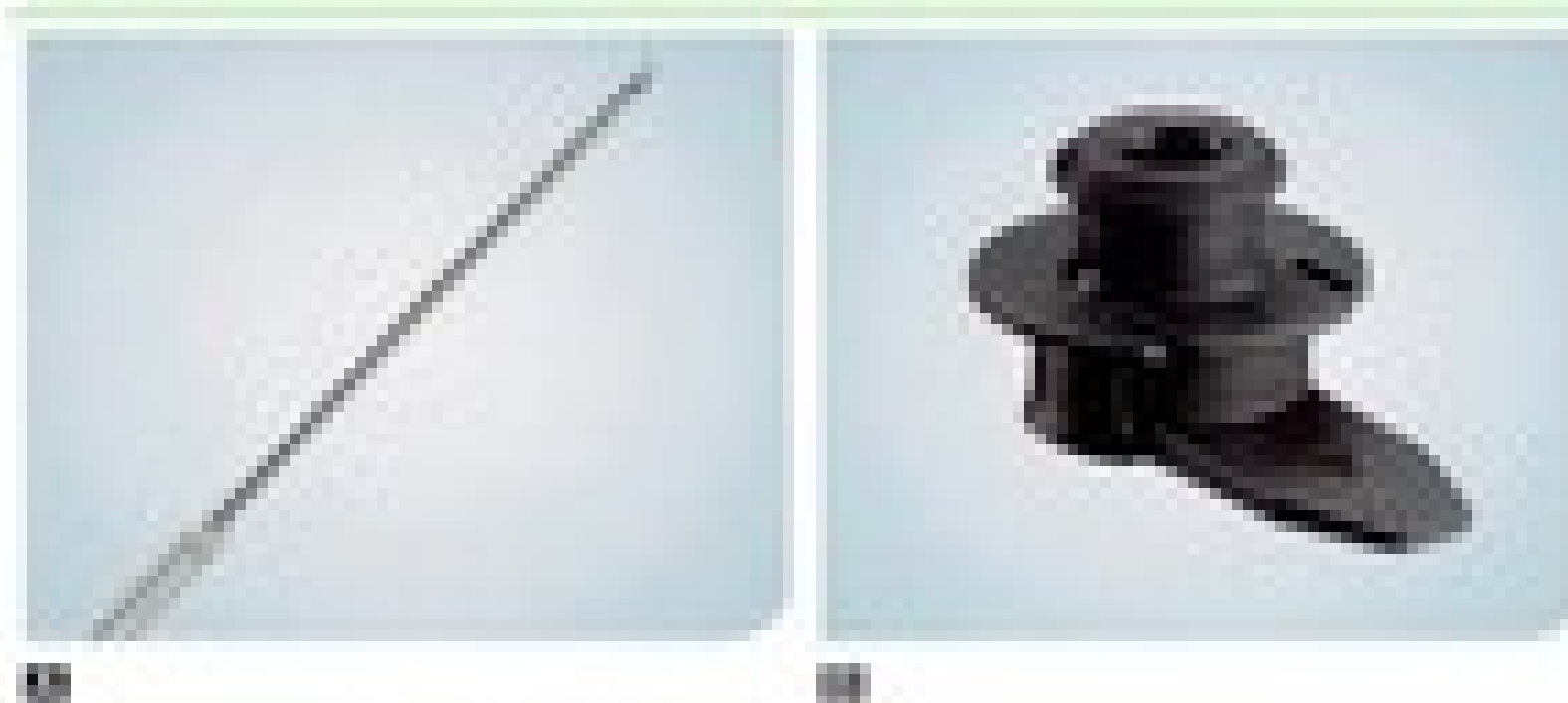

A: Aguja ViziShot EBUS-TBNA

- * Mango ergonómico con doble mecanismo de seguridad para proteger el canal del endoscopio
- * Mayor flexibilidad y punción mejorada
- * Punta distal tratada para una ecogenicidad eficiente
- * Aguja disponible en 21 y 22G
- * Aguja con longitud ajustable desde 20 mm hasta 40mm
- * Cada kit de aguja se compone de una aguja, una jeringa de aspiración de seguridad de 20 ml con llave de paso y una válvula de biopsia con adaptador (MAJ-1414)

B: MAJ-1414 Válvula de biopsia, especialmente diseñada para uso con los endoscopios Olympus EBUS

Número de Catálogo	Piezas por Paquete	Canal de Trabajo Mínimo (mm)	Longitud de Trabajo (cm)	Diámetro de la Aguja (G)	Longitud Máxima de la Aguja (mm)	Para uso con	Área de Compatibilidad	Precio de Lista
A NA-2018X-4021	5	2.0	70	21	40	MAJ-1414	①	
A NA-2018X-4022-A	5	2.0	70	22	40	MAJ-1414	①	
A NA-2018X-4022-B	1	2.0	70	22	40	MAJ-1414	①	\$ -
B MAJ-1414	10	válvula adaptadora				NA-2018X-4021, NA-2018X-4022	①	

Revisar historial de ventas de los últimos años

Número de Catálogo	Descripción
A NA-2018X-4021	El juego incluye: 5 agujas, 5 jeringas con llave, y 5 válvulas de biopsia MAJ-1414
A NA-2018X-4022-A	El juego A incluye: 5 agujas, 5 jeringas con llave, y 5 válvulas de biopsia MAJ-1414
A NA-2018X-4022-B	El juego B incluye: 1 aguja, 1 jeringa con llave, y 1 válvula de biopsia MAJ-1414

S



"Descubierta y parcialmente cubierta disponible"

para estenosis biliares benignas y malignas

• Celda fija con construcción trenzada


• Recubierta de silicona en la superficie interna y externa

- para prevenir el riesgo de crecimiento interno del tumor

- para ayudar con el flujo de bilis suave

• La cuerda de recuperación facilita una extracción segura y suave

S Flare

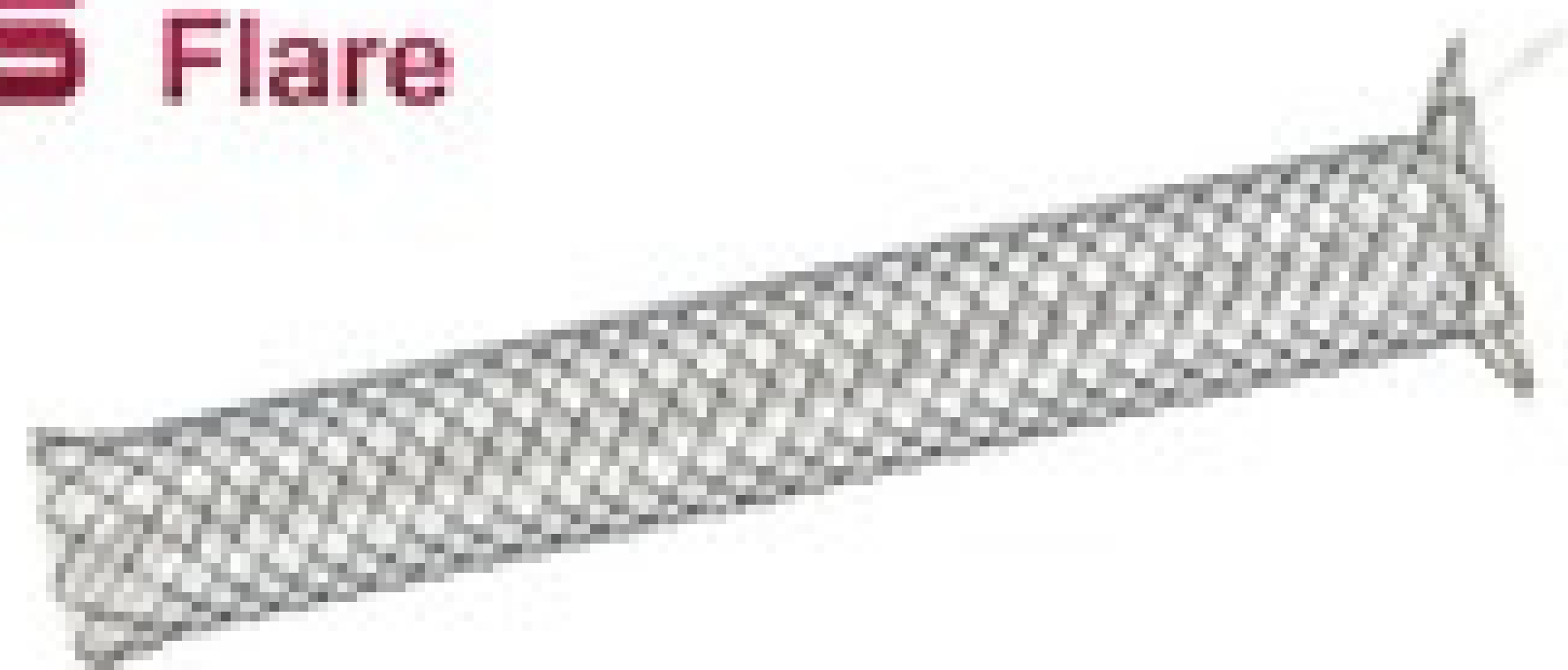

para estenosis biliares benignas y malignas

• Cuerpo tubular completamente cubierto con bengalas en ambos extremos

- La cubierta de silicona evita el crecimiento interno del tejido

- Las bengalas con diferentes ángulos evitan la migración

• Una cuerda de recuperación facilita la extracción segura y sin problemas.

D



para estenosis biliares malignas

• Celda no fija con construcción de tejido

- escorzo bajo para un posicionamiento preciso

- combinación óptima de fuerza radial y axial para mantener permeabilidad luminal en la anatomía tortuosa

M



para estenosis hilar malignas

• Procedimiento suave de colocación de stent lado a lado

- Se pueden introducir simultáneamente 2 (Dos) sistemas de administración 6Fr en el canal de trabajo para el procedimiento de colocación de stent lado a lado en el hilar estenosis biliar

LCD™



para obstrucción hilar

• El diseño optimizado para el procedimiento Stent-in-Stent

- El diseño de celda grande con una construcción de tejido permite un cómodo colocación del 2do stent

- El eje vertical ajustable se puede mover fácilmente a un lado durante el procedimiento stent-in-stent para la 2da colocación de stent

• Perfil de entrega 6, 7, 8Fr disponible

- El sistema de administración 6Fr facilita el acceso fácil a la lesión al tiempo que permite implementación más fluida

COMVI™




para estenosis biliares malignas

• Construcción de triple capa

- Membrana de PTFE evita el riesgo de tejido invasión

- la malla de alambre exterior evita el riesgo de migración

- la estructura celular no fija permite que el stent se adapte a la forma del conducto biliar

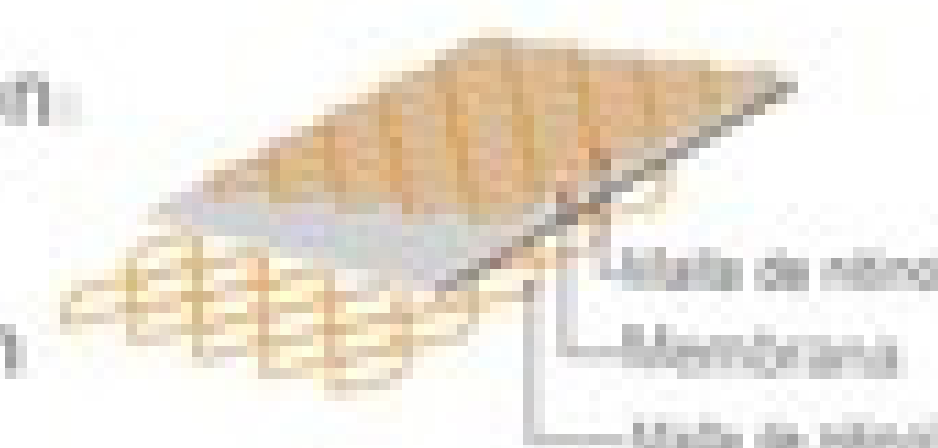

BUMPY™



para estenosis biliares y pancreáticas benignas

- Tamaños irregulares de celdas con diferentes magnitudes del radial segmentario fuerza con extremos acampanados
- prevención de la sepsis pancreática o pancreatitis relacionada con el stent;
- reducir el riesgo de migración

BUMPY™ String



para estenosis anastomóticas después de un trasplante de hígado

- Stent™ lleno de BACHES (arriba) con una larga cuerda de recuperación
- La corta longitud del stent reduce las complicaciones relacionadas con el stent.
- Una cuerda de recuperación radiopaca de platino de 10 cm ayuda a facilitar la extracción

KAFFES™



para estenosis anastomóticas después de un trasplante de hígado

- Diseño de longitud corta y cintura en la mitad de la porción
- prevención para impartir presión sobre una gran área del conducto normal por reducción del riesgo potencial de necrosis y fibrosis
- fuerte fuerza radial para evitar la migración.
- Cuerda larga de recuperación con revestimiento de radio de platino
- fácil extracción desde la ubicación alta del CBD

GIOBOR™



para Hepaticogastrostomía guiada por USE

- Diseño parcialmente cubierto (70% cubierto, 30% desnudo)
- La porción cubierta evita la fuga de bilis entre el conducto hepático izquierdo y el estómago
- La porción desnuda evita el bloqueo de las ramas laterales en el conducto hepático

NAGI™




para el drenaje de pseudoquistes pancreáticos

- Bordes acampanados anchos y lisos
- para prevenir el riesgo de migración y la posibilidad de stent relacionados/ daños luminales
- Disponible en varios diámetros (hasta 16 mm)
- optimizar el drenaje y la necrosectomía
- Cadena de recuperación para reposicionar y / o quitar fácilmente

SPAXUS™

para pseudoquistes pancreáticos o drenaje de la vesícula biliar

- Diseño flexible para una aposición acomodativa independientemente del grosor de la pared
- el revestimiento completo de silicona con bridas grandes evita la migración y las fugas
- diámetros de 8, 10, 16 mm que permiten aplicar diversas indicaciones
- Stent precargado en sistema de colocación convencional 10Fr
- marcador azul en el sistema de administración diseñado para un procedimiento preciso

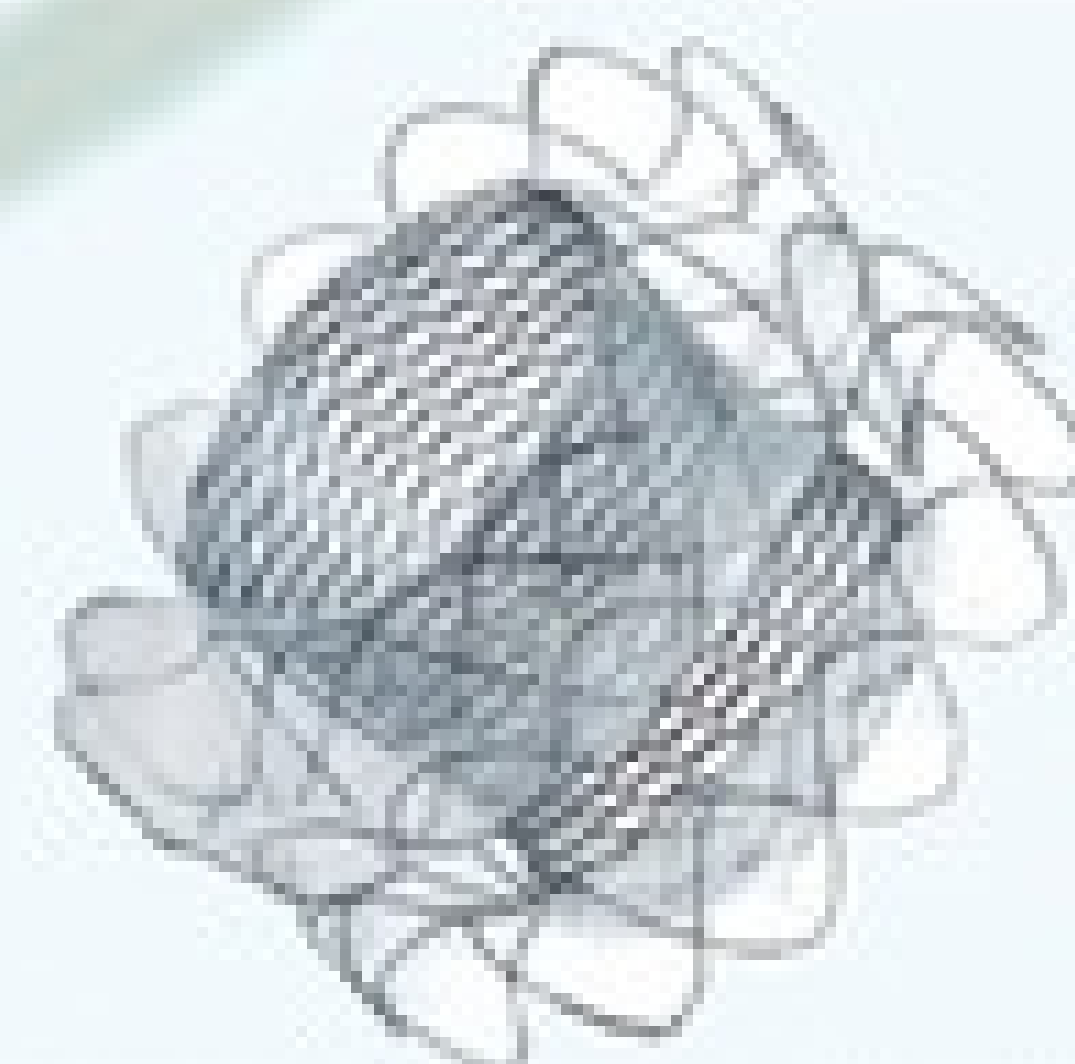


Sistema de Colocación de alambre Corto para Stents Biliares

Información de Pedido

	Tipo de Stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega	
		Diámetro percutáneo endoscópico (mm)		Largo (cm)		Francés (Fr)	Largo (cm)
A través de el alcance (TTS)	S (Descubierto)	B***	T***	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	7	180/50
	S (Cubierto)	BS***F	TS***F			8.5	
	S (Ambos desubidos)	BS***B	TS***B			8	
	Unidad 3	BS***FW	TS***FW			8.5	
	D	BD***	TD***			8	
	M4	BN***-6	TN***	6, 8	4, 5, 6, 7, 8	6	
		BN***	-6TN***	6, 8, 10	9, 10, 12	7	
	LCD*	BLD***-6 TLD***-6		6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	6	
		BLD***-7 TLD***-7				7	
		BLD***	TLD***			8	
	COMVI*	BC***F	TC***F	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	8	
	COMVI* (Ambos desubidos)	BC***B	TC***B			8	
	DE BACHES*	BK***CW	TK***CW			8.5	
	Cuerda* BUMPY*	BK***CW2				8.5	
	KAFFES*	BS***F2	TS***F2	6, 8	4, 5, 6, 7, 8	8.5	180/50
				10		9	
	GIOBOR*	BS***FP		8,10	8,10	8.5	180
	NAGI*	BS***FW		10, 12	1, 2, 3	9	
				14, 16	2, 3	10	
	SPAXUS*	SS***FW		8, 10, 16	2	10	

* LCD*: BLD1012-6, TLD1012-6 no están disponibles.

Sistema de cable corto

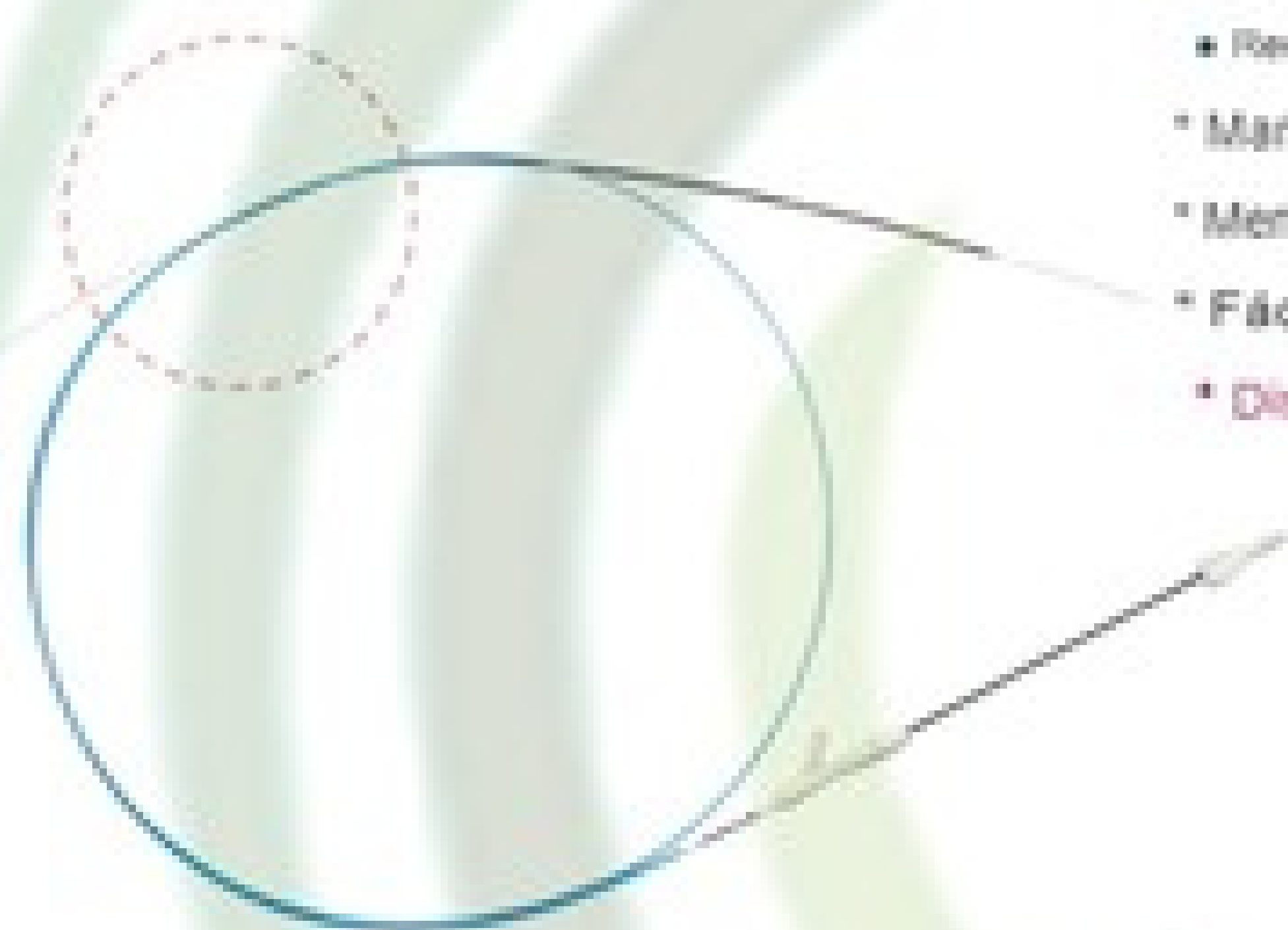

- * Ahorro de tiempo durante los intercambios de dispositivos y las maniobras terapéuticas.
- Reducción del tiempo de exposición a la fluoroscopia
- * Mantenimiento del acceso
- * Menor dependencia de un asistente bien capacitado
- * Fácil control del alambre guía
- * Disponible con: S, D, LCD*, COMVI*, BUMPY*



Información de Pedido


Stent Type	Code	Stent Size		Delivery system	
		Diameter (mm)	Length (cm)	French (Fr)	Length (cm)
S (Uncovered)	BM***	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	8.5	180
S (Covered)	BSM***F				
S (Both bare)	BSM***B				
S Flare	BSM***FW				
D	BDM***				
LCD*	BLDM***				
COMVI*	BCM***F				
COMVI* (Both bare)	BCM***B				
BUMPY*	BKM***CW				

Varios Sistemas de Administración para Endoprótesis Esofágica

Sistema de Liberación Proximal




- * Posicionamiento preciso del stent
- la parte proximal se libera antes que su parte distal para permitir colocación con consideración del margen tumoral proximal sin fluoroscopia
- recomendado para estenosis esofágica superior

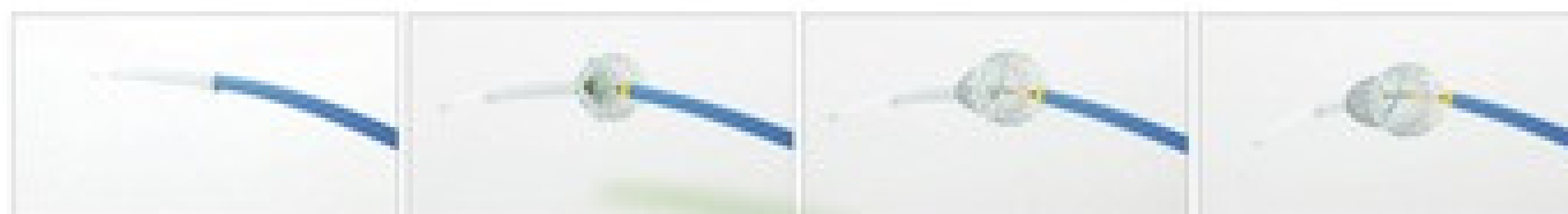

Información de Pedido

Tipo de Stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega 1
	Cuerda Proximal	Ambas Cuerdas	Diámetro (mm)	Largo (cm)	Largo (cm)
S	ESP***F	ESP***FR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	70
S (Ambos desnudos)	ESP***B1				
DOBLE*	ESP***FD	ESP***FDR2	16, 18, 20, 22		
CERVICAL*	ESP***FV	ESP***FVR2			
CONIO*	ESP***FW		10, 12, 14, 16		

A Través del Sistema de Entrega Scope (TTS)

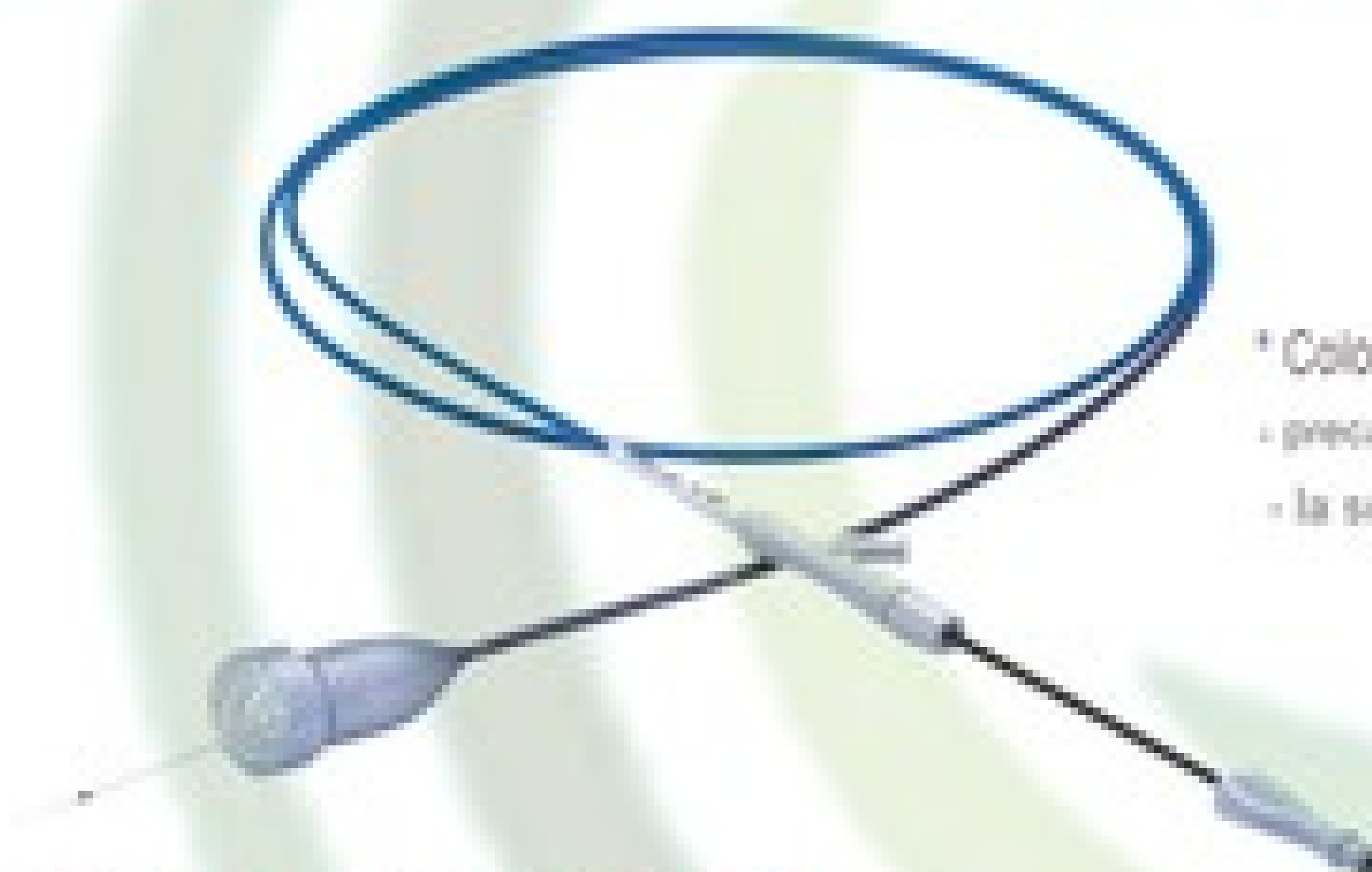

- * Colocación de stent fácil y sencilla a través del canal del endoscopio
- precargado en un sistema de administración de 10.5 Fr para stents cubiertos de esófago
- la solución práctica para anatomías estrechas, estrechas o tortuosas

Información de Pedido

Tipo de Stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega	
			Diámetro (mm)	Largo (cm)	Francés (Fr)	Largo (cm)
S	EST***MF	EST***FR2	18, 20, 22	6, 8, 10 12, 14, 15	10.5	160
	EST***F-18					180
	EST***F-32					220
S (Ambos desnudos)	EST***B					160
	EST***B-18					180
	EST***B-22					220

Stent Esofágico

S



"Total y parcialmente cubierto disponible"

para estenosis esofágicas benignas y malignas

- Celda fija con construcción trenzada
- alta flexibilidad y fuerza radial óptima
- para reducir el riesgo de crecimiento interno del tumor
- Cubierta de silicona y extremos suaves y redondos.
- para reducir la reacción de hiperplasia tisular

DUAL™



para estenosis esofágicas benignas y malignas

- Estructura dual con una construcción de tejido
- La construcción de tejido permite que el stent se adapte al movimiento del esófago
- La estructura dual minimiza el acortamiento y permite una precisión-posicionamiento del stent

DOUBLE™



para estenosis esofágicas malignas

- Diseño de doble capa
- la cobertura total de silicona previene el riesgo de crecimiento tumoral hacia adentro - La malla exterior descubierta adicional ayuda a resistir la migración

DOUBLE™ (Anti-reflux)



para prevenir el reflujo gastroesofágico*

- Falda de PTFE anti-reflujo
- para bloquear el reflujo gástrico con la colocación del stent en la unión EG
- Malla exterior descubierta adicional para resistir la migración

CERVICAL™



para estenosis esofágicas superiores

- Diseño de cabeza proximal corta
- para evitar daños en las cuerdas vocales en caso de colocarlas cerca del esfínter esofágico superior
- Diseño completamente cubierto y cuerda de recuperación para facilitar la extracción

CONIO™



para estenosis hipofaríngeas

- Diámetro pequeño con diseño de cabeza proximal
- especialmente diseñado para estenosis hipofaríngeas refractarias
- Diseño completamente cubierto y cuerda de recuperación para facilitar la extracción

Stent Esofágico

CONIO™ II



para estenosis esofágicas superiores y medias benignas y malignas

- **Cabezal:** Estructura tipo S recubierta de sílica para una mejor palación
- **Cuerpo:** Un tipo D conformable con una membrana de PTFE para evitar complicaciones relacionadas con el stent
- **Parachoques:** Un anillo doble recubierto de sílica para evitar la migración.

MEGA™



para fugas o fistulas después de una gastrectomía en manga

- * **Diseño suave y flexible**
 - para adaptarse a la anatomía aguda después de la gastrectomía en manga
- * **Totalmente cubierto con sílica**
 - para permitir una fácil extracción
- * **Diámetro grande y longitud larga del stent**
 - para prevenir la migración

BETA™



para fugas o fistulas después de una cirugía bariátrica

- * **Doble exterioridiseño de capas con sílica y PTFE revestimiento combinado**
 - para evitar el riesgo de migración y contacto de cualquier sustancia en la fuga, o fistula
 - para prevenir el crecimiento interno del tejido y permitir una fácil extracción
- * **Estructura flexible y adaptable**
 - para encajar en anatomía tortuosa

Información de Pedido

Tipo de Stent	Código		Stent tamaño		Sistema de entrega I
	Cuerda Proximal	Ambas Cuerdas	Diámetro (mm)	Largo (cm)	Largo (cm)
S	ES *** F	ES *** FR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	70
S (Amor desmontable)	ES *** SI				
DUAL*	EK *** F		18, 20	6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20	
			22	6, 8, 10, 12, 14, 15, 18	
			24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	
DOBLE*	ES *** FDI	ES *** FDR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	
DOBLE** (antirreflujo)	EA *** FD				
CONIO*	ES *** FN	ES *** FNR2	10, 12, 14, 16	6, 8, 10, 12, 14, 15	
CONIO™ II	EK *** FN		10, 12, 14, 16	8, 10, 12	
CERVICAL*	ES *** FV	ES *** FVR2	16, 18, 20, 22, 24	6, 8, 10, 12, 14, 15	
MEGA**	ES *** F	ES *** FR2	22, 24, 28	18, 23	
BETA*	EK *** FND2		22, 24	14, 15, 16, 18, 20, 22	
			26, 28	14, 15, 16, 18, 20	
BETA™ II	EK *** FNT2		18, 20, 22	8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	
			24, 26, 28	10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	

Stent Duodenal y Colónico

D



para obstrucción maligna

- Celda no fija con construcción de tejido
- escorzo bajo para un posicionamiento preciso
- combinación óptima de fuerza radial y axial para mantener luminal permeabilidad en anatomía tortuosa

S



"Total y parcialmente cubierto disponible"

para obstrucción benigna y maligna


- Diseño recubierto de silicona con un balón grande
- para prevenir el riesgo de crecimiento interno del tumor
- La cuerda de recuperación facilita una extracción segura y suave

COMVI™



para obstrucción maligna

- Construcción de triple capa
- Membrana de PTFE evita el riesgo de invasión tisular
- la malla de alambre exterior evita el riesgo de migración
- la estructura celular no fija permite que el stent se ajuste en tortuosa anatomía

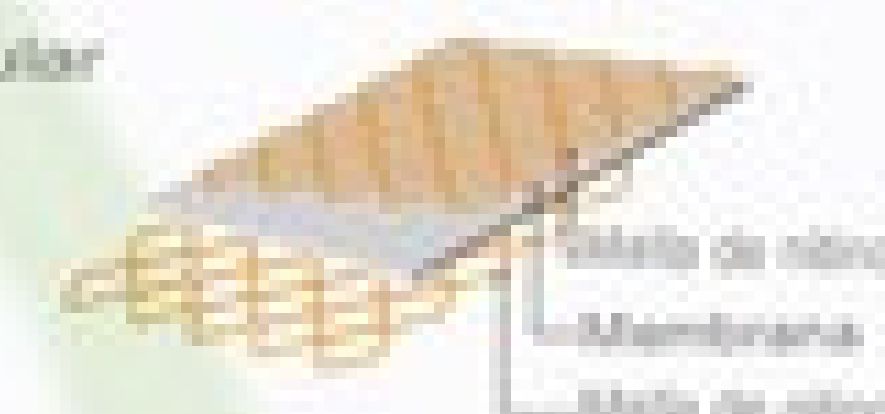

COMVI™ (Flare)



para obstrucción maligna

- Construcción de triple capa
- extremo proximal descubierto de la llamada para reducir la migración
- cuerpo estructurado de celda grande con alambre grueso para reducir el riesgo de fractura y mejora la fuerza radial
- Se carga un diámetro grande (hasta 26 mm) en un sistema de entrega de 10.5 Fr

Información de Pedido

Tipo de Stent	OTW /			TTS			Longitud de entrega (cm)	
	Código	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Código	Diámetro (mm)	Largo (cm)	OTW /	TTS
Stent Pílorico / Duodenal								
S (Cubierto)	PD***F	18, 20, 22, 24, 26, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	PST***F	18, 20, 22	6, 8, 10, 12, 14, 15	135	180
S (Ambos desnudos)	PD***B			PST***B				
S (Desnudo proximal)	PD***H			PST***H				
D	PD***W			PDT***W				
COMVI™	PC***BA			PCT***BA	18, 20, 22	6, 8, 10, 12		
COMVI™ (Llamada)				PCT***P	18, 20, 22, 24, 26	6, 8, 10, 12		180
Stent Colónico Enteral								
S (Cubierto)	CS***F	18, 20, 22, 24, 26, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	CST***F	18, 20, 22	6, 8, 10, 12, 14, 15	70	220
S (Ambos desnudos)	CS***B			CST***B				
S (Desnudo distal)	CS***H			CST***H				
OI	CD***W	18, 20, 22, 24, 26, 28		CDT***W	18, 20, 22, 24, 26, 28			
COMVI™	CC***BA	18, 20, 22, 24, 26, 28	6, 8, 10, 12	CCT***BA	18, 20, 22	6, 8, 10, 12		
COMVI™ (Llamada)				CCT***P	18, 20, 22, 24, 26	6, 8, 10, 12		220



Fórceps para extracción de cuerpos extraños
boca corta de cocodrilo, de 1 a 2 dientes, recubierta

Artículo no.	Diámetro mm	Longitud cm
990721320	2,3	230
990711320	1,8	230



Fórceps para extracción de cuerpos extraños
boca larga de cocodrilo, de 1 a 2 dientes, recubierta

Artículo no.	Diámetro mm	Longitud cm
990721420	2,3	230



1001777

Bloque de mordida para niños, con cinta para la cabeza

1001777

Mordedor para niños, con cinta para la cabeza, sin látex



Aguja de deflación
Punc

Artículo no.	Cánula mm.	Diámetro mm.	Longitud cm.
REFERENCIA 4234171	1	2,35	180


Pinzas para extracción de cuerpos extraños, Pinzas de extracción
Vibora

Artículo no.	tenazas	Diámetro mm.	Longitud cm.
REFERENCIA 4228171	2	2,3	180




Cepillo de citología
con punta guía, doble lumen,
para cable guía de 0.035 pulgadas.

Artículo no.	Cepillo de Diámetro mm	Diámetro mm	Longitud cm
0821281	2,5	2,7	200

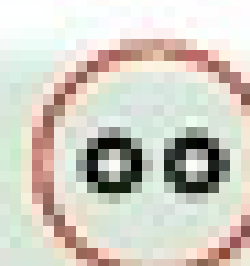


Cepillo de citología

Artículo no.	Cepillo de Diámetro mm	Diámetro mm	Longitud cm
0832011	2,5	1,75	120
0833111	3,0	2,35	160
0833211	3,0	2,35	220

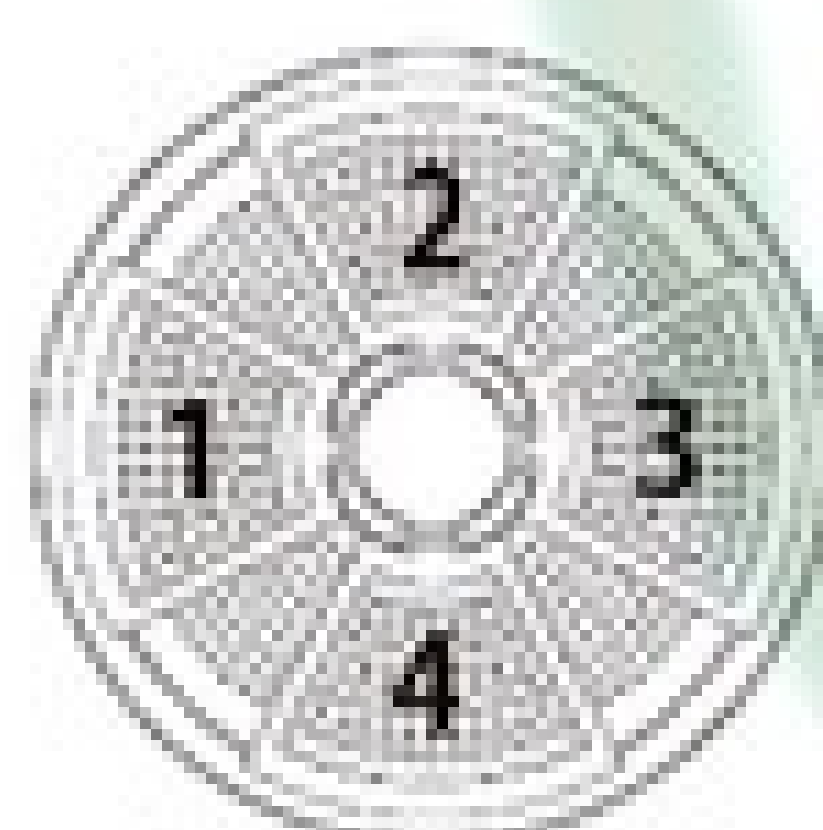


4 Cámaras

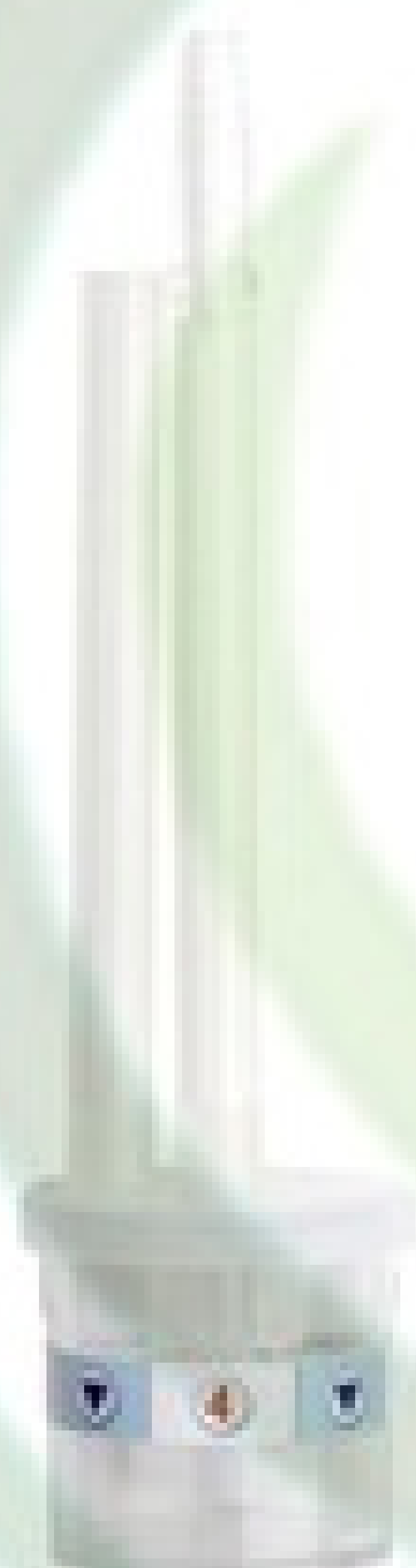



Trampa de Pólipos de Succión
Sistema de Transporte Fácil.

Artículo no.
1001714

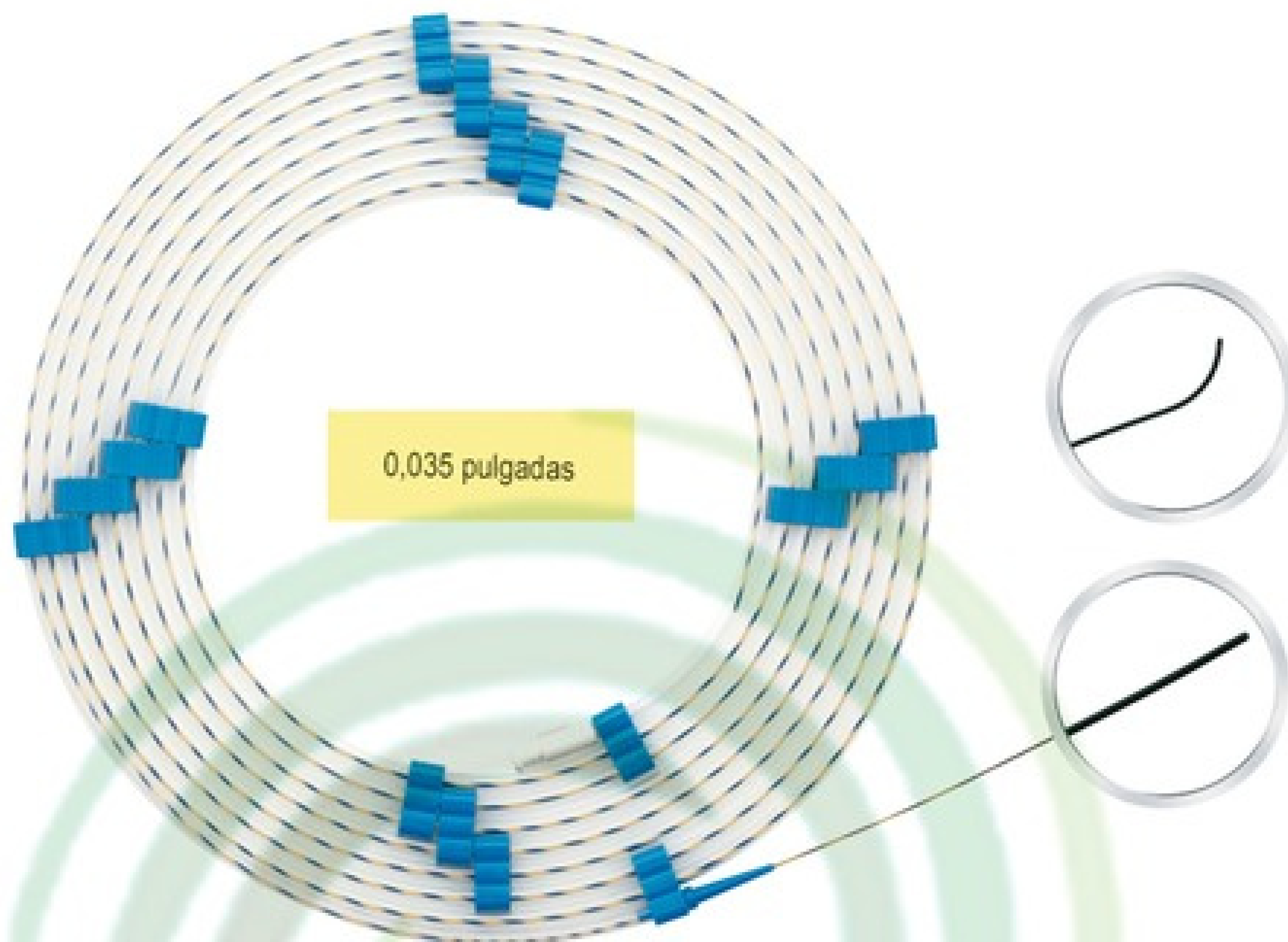

Alambre guía, Punta a presión*
resistente a las torceduras, Nitinol

Artículo no.	Punta de alambre guía	Diseño de color	Diámetro pulgadas	Longitud cm
003926	recto	amarillo-negro	0.035	260
003926 A	angulado	amarillo-negro	0.035	260
003946	recto	amarillo-negro	0.035	460
003946 A	angulado	amarillo-negro	0.035	460
003955	recto	amarillo-negro	0.035	550

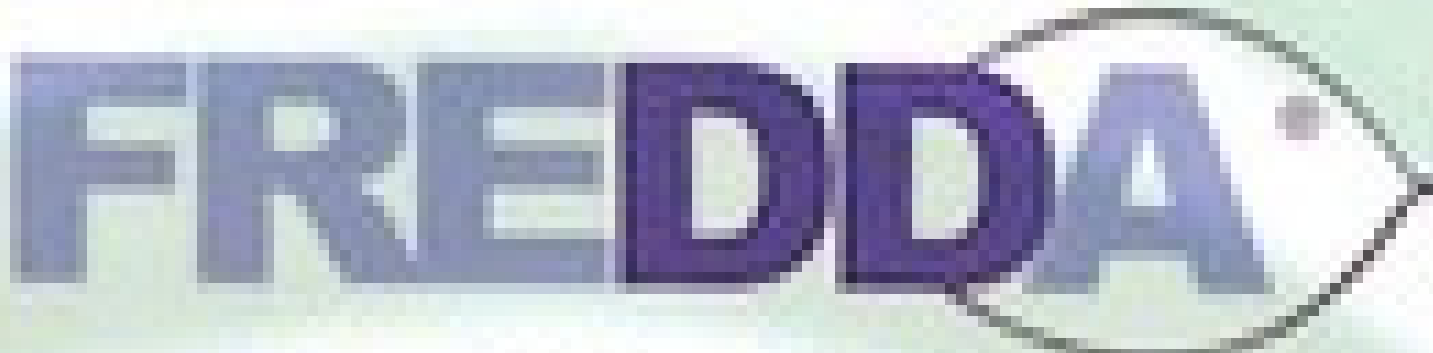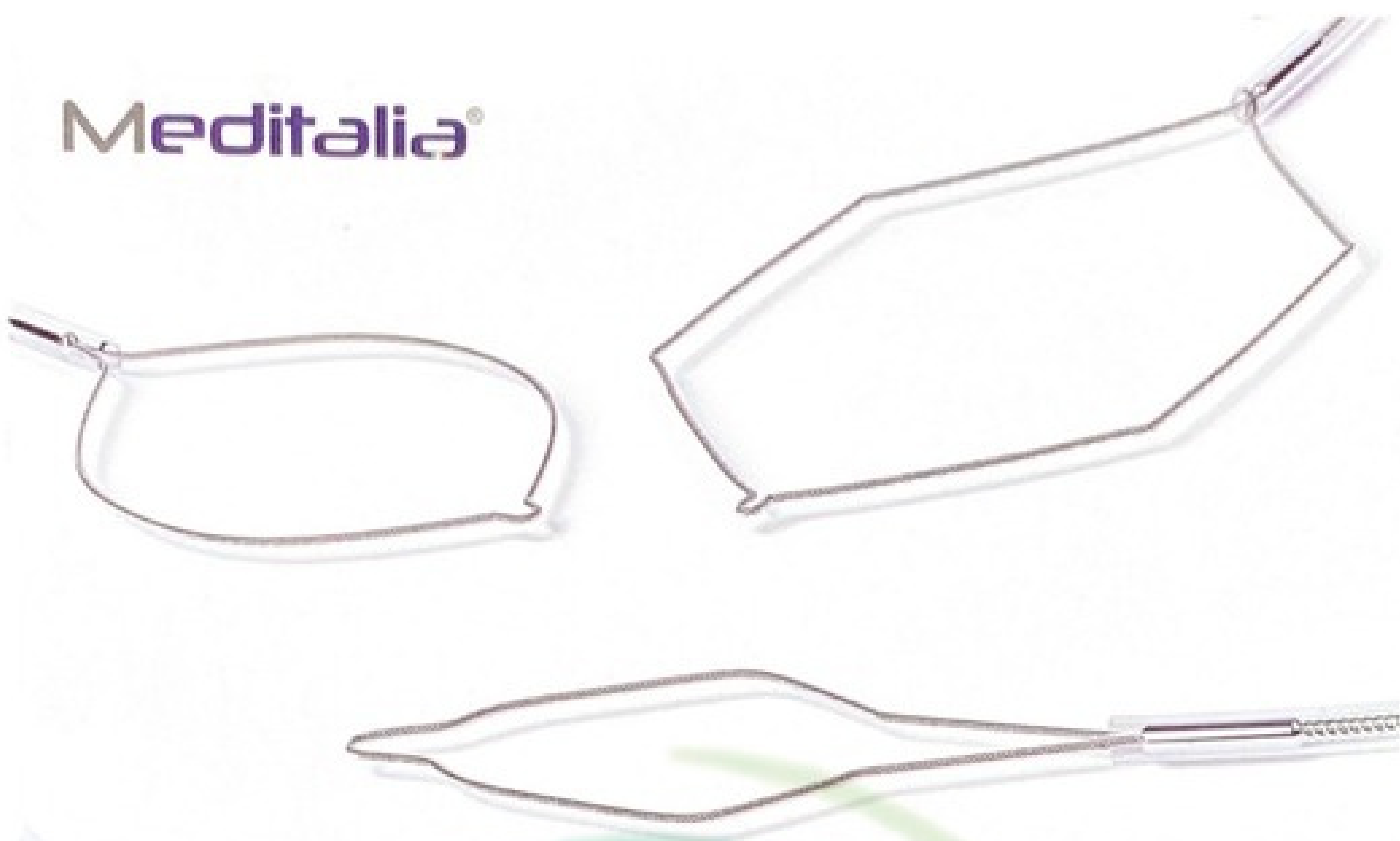

Anse da polipectomia a freddo / Trampas de polipectomía fría

Características y Beneficios

Morfologia filo per resezione polipi a freddo, con diametro 0,30. Ottima memoria di forma, rotazione graduata 1:1

Morfología del alambre para la resección fría de pólipos con diámetro 0,30 mm. Excelente memoria de forma. Rotación graduada 1:1

Información de productos

Referencias	Diámetro de la vaina	Canal	Longitud de trabajo	Diámetro del lazo	Forma de bucle
MED-120-FRÍO	2,3 mm I	2,8 mm	23 centímetros I	9 milímetros	Exacto SIMILAR®
MED-121-FRÍO	2,3 mm II	2,8 mm I	23 centímetros I	10 mm I	ovalado ↺
MED-122-FRÍO I	2,3 mm I	2,8 mm I	23 centímetros	15 mm I	ovalado ↺
MED-123-FRÍO	2,3 mm I	2,8 mm I	23 centímetros	15 milímetros II	hexagonal ↺
MED-124-FRÍO	2,3 mm I	2,8 mm I	23 centímetros I	15 mm II	hexagonal ↺



Netis®

Ansa a rete da recupero / Loopnet para recuperación



Características y Beneficios

Ansa monofilamento súper rígido.
Lazo súper rígido de monofilamento.

10% en più di rete assicura maggiore flessibilità.
Más flexibilidad debido a un 10% adicional de red.

Non c'è sfido di rete al di fuori dell'ansa.
No hay red adicional saliendo de la trampa.

La rete viene inserita nell'ansa, cucita a mano e ritagliata.
La red se ensambla a la trampa y luego se corta y cortado a mano.

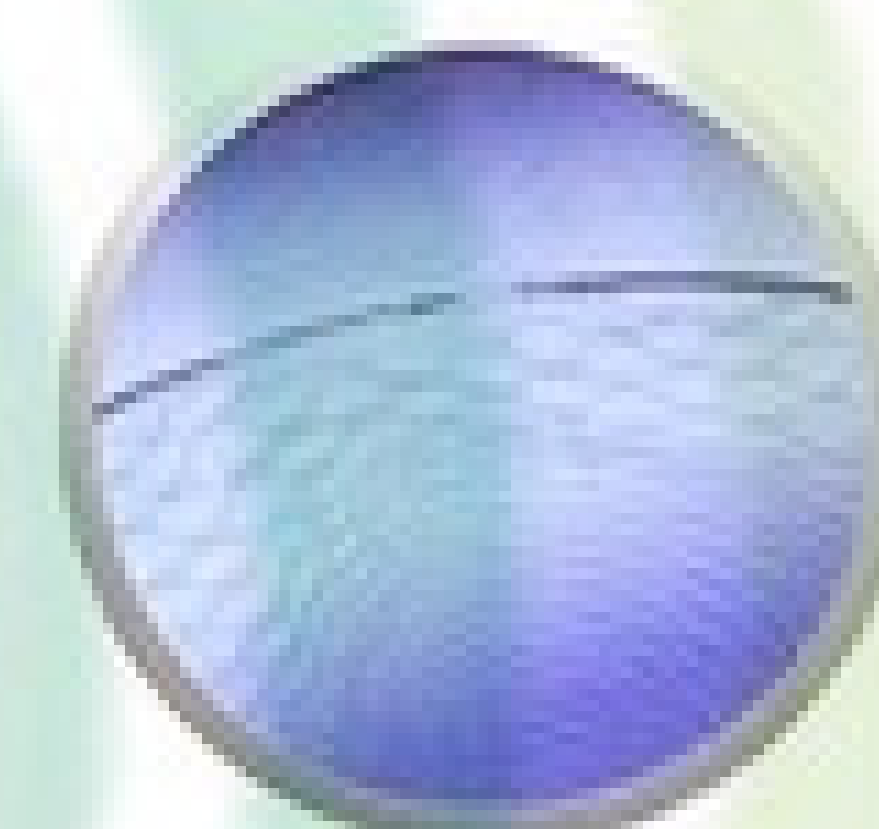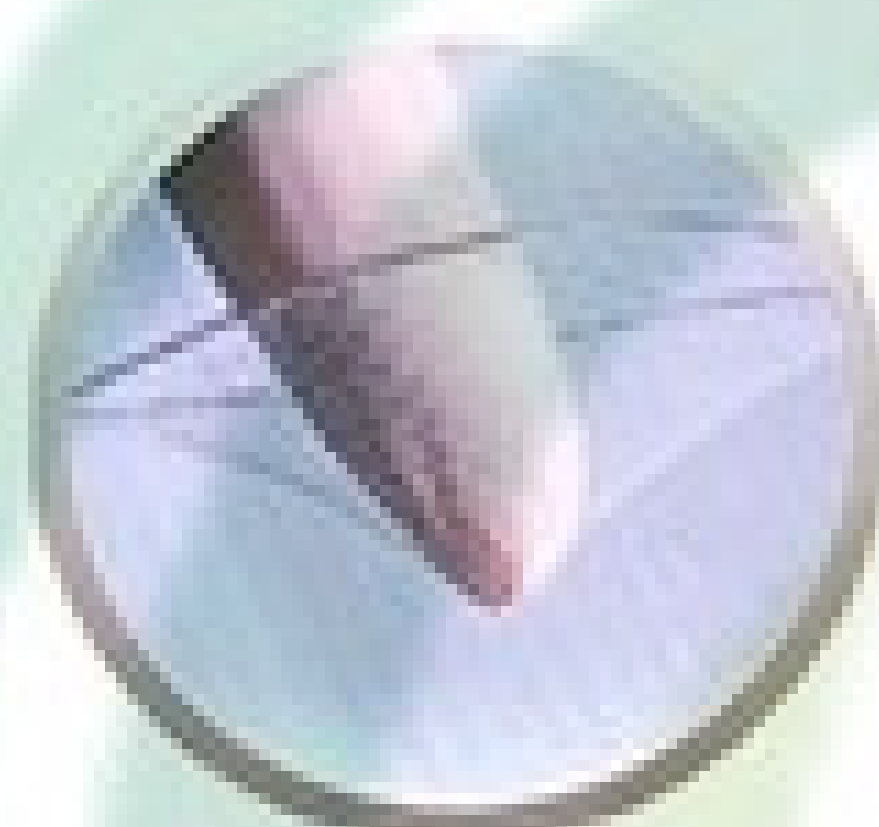


Información de productos

Referencias	Longitud de trabajo	Diámetro de la vaina	Canal	Diámetro neto del lazo	Funda
MED-132-NETO	28 cm (11")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 40x55 mm (1 1/2" x 2")	HDPE
MED-133-NETO	28 cm (11")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 30x60 mm (1 1/4" x 2 1/4")	HDPE
MED-194-NETO	18 cm (7")	1,3 mm (1/16")	2,0 mm (3/16")	ovalado 25x45 mm (1" x 1 3/4")	HDPE
MED-195-NETO	28 cm (11")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 25x45 mm (1" x 1 3/4")	HDPE
MED-217-NETO	25 cm (10")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 30x60 mm (1 1/4" x 2 1/4")	HDPE
MED-218-NETO	20 cm (8")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	octogonal 40x55 mm (1 1/2" x 2")	HDPE
MED-219-NETO	18 cm (7")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	octogonal 40x55 mm (1 1/2" x 2")	HDPE
MED-200-NETO	13 cm (5")	1,3 mm (1/16")	2,0 mm (3/16")	ovalado 10x25 mm (3/8" x 1")	HDPE
MED-201-NET	20 cm (8")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 50x80 mm (2" x 3 1/4")	HDPE
MED-202-RED	18 cm (7")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 50x80 mm (2" x 3 1/4")	HDPE
MED-203-RED	28 cm (11")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 30x60 mm (1 1/4" x 2 1/4")	HDPE
MED-204-RED	28 cm (11")	2,5 mm (1/8")	2,8 mm (1/8")	ovalado 40x55 mm (1 1/2" x 2")	HDPE

Aplicador de clip para certificado de emostación para compatibilidad sanguínea post polipectomía con duodenoscopia.

Aplicador de clip de hemostasia para sangrado post-polipectomía, compatible con duodenoscopia.

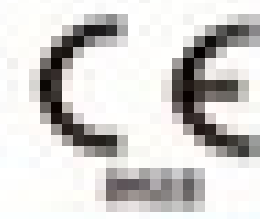


Clip único para emostasi en commercio con capacità di presa misurata in forza newton (N) 3,90, che assicura una migliore presa.

Clip único para hemostasia en el mercado con un capacidad de fuerza de agarre para 3,90 newton (DN), eso asegura un mejor agarre.

- 1 Maggiore la sezione curvata munita di denti; aumenta in maniera efficace la forza di attrito sul tessuto evitando che lo stesso scivoli via.
Aumentando efectivamente la fuerza de fricción sobre el tejido, previniendo el tejido se resbale.
- 2 Maggiore la rigidità nella sezione di piegatura della clip; tutto ciò permette di aumentare la resistenza alla flessione quando si preme sul tessuto.
Aumento de la rigidez en la sección de flexión del clip.
Propósito: aumentar la resistencia a la flexión al presionar el tejido, así como la presión y la tensión sobre el tejido.
- 3 Conformazione più avvolgente delle barre aumenta in modo efficace il grado di pressione sulla superficie di presa per una migliore chiusura vascolare.
Estrechando la brecha de la barras de clip. Para aumentar efectivamente el grado de presión sobre el tejido de agarre para un mejor cierre vascular.
- 4 Clip esclusiva con apertura 16 mm y con extensión braccia ridotta.
Exclusivo hemoclip con apertura de 16 mm con extensión reducida del brazo.



Aplicador de clips para emostasis / Aplicador de clips para hemostasia

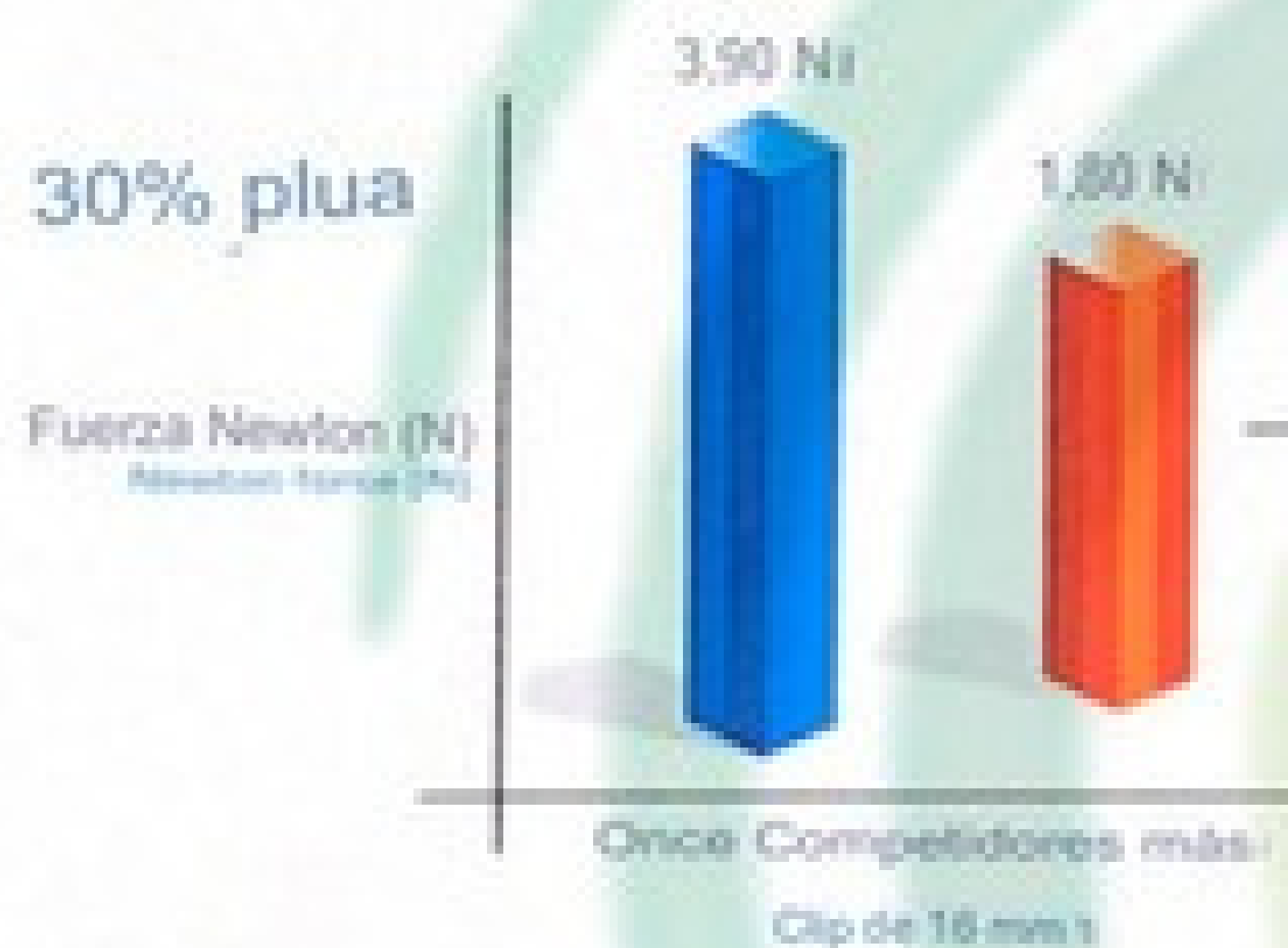

• Più sicura per l'emostasi
Más seguro para la hemostasia



Informazione di prodotto

Referencias	Abriendo span	Longitud de trabajo	Angulo de gara	Morfología	Canal	Funda
MED-200-CLP	11 milímetros	18 centímetros	90°	estándar	2,8 mm	cubierto
MED-201-CLP	11 milímetros	18 centímetros	135°	estándar	2,8 mm	cubierto
MED-202-CLP	11 milímetros	18 centímetros	90°	estándar	2,8 mm	cubierto
MED-203-CLP	11 milímetros	20 centímetros	90°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-204-CLP	11 milímetros	20 centímetros	135°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-205-CLP	9 mm	20 centímetros	90°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-206-CLP	11 milímetros	20 centímetros	135°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-207-CLP	11 milímetros	20 centímetros	90°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-410-CLP	16 milímetros	20 centímetros	135°	giratorio	2,8 mm	cubierto
MED-420-CLP	16 milímetros	20 centímetros	135°	giratorio	2,8 mm	cubierto



BLUE EYE (LIFTING SUBMUCOSO)

ACIDO HIALURÓNICO ENTINTADO CON AZUL DE METILENO



BLACK EYE TINTA PARA MARCAJE ENDOSCÓPICO



BLACK EYE



Catálogo de Productos

Este catálogo, cuidadosamente elaborado, es exclusivo de nuestra marca y se emite con el único propósito de servir a nuestros clientes. Queremos destacar que este material no está destinado al público general y su distribución se limita estrictamente a un uso interno.